




Prefert®

Vaginal Gel bei Kinderwunsch
Gel vaginal pour désir d'enfant
Vaginale gel bij kinderwens
Gel vaginale di ausilio alla
procreazione

Medintim

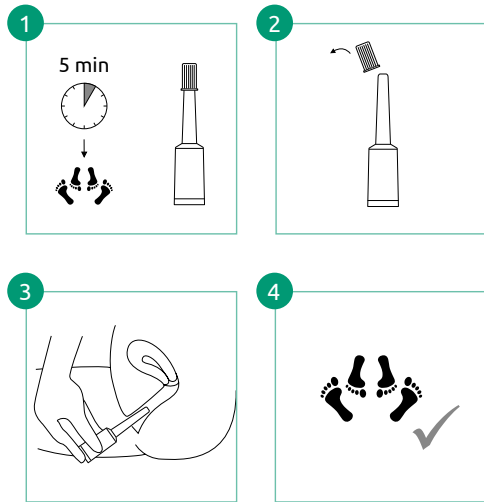

Anwendungshinweise vor Gebrauch lesen!
Veuillez lire la notice avant l'utilisation
Lees de instructies vóór gebruik
Leggere le istruzioni prima dell'uso

Prefert® Vaginal Gel bei Kinderwunsch

Wirkungsweise:

Prefert® Vaginal Gel schafft eine Umgebung, in der sich Spermien optimal zur Eizelle bewegen können.

Seine osmotischen Eigenschaften bieten einen optimalen Bewegungsspielraum. Das fördert die Beweglichkeit der Spermien und ist eine ideale Hilfe für einen erfolgreichen Weg zur Eizelle.

Mit einem neutralen pH-Wert von 7,2 schützt Prefert® die Spermien vor einer zu sauren Umgebung und sichert so ihr Überleben.

Prefert® Vaginal Gel verbessert die Beweglichkeit der Spermien im Vergleich zu klassischen, wasserlöslichen Gleitmitteln.

Anwendungszeit:

Zur vorübergehenden Anwendung an den drei fruchtbarsten Tagen des weiblichen Zyklus (Zeitpunkt des Eisprungs).

Nur einmal innerhalb von 24 Stunden anwenden.

Inhaltsstoffe:

Gereinigtes Wasser, Natriumchlorid, Natriumphosphat, Kaliumphosphat, Arabinogalactan, Hydroxyethylcellulose, Polyhexanid

Anwendung:

5 Minuten vor dem Geschlechtsverkehr einführen.

1. Nehmen Sie vor dem Geschlechtsverkehr einen Einmal-Applikator Prefert® Vaginal Gel aus der Verpackung
2. Entfernen Sie die Verschlusskappe.
3. Führen Sie den Vaginal-Applikator in die Scheide ein. Drücken Sie den Applikator zusammen, um das Gel einzuführen. Entfernen Sie den Applikator.
4. Jetzt können Sie Geschlechtsverkehr haben.

Der Packungsinhalt reicht für 8 Anwendungen.

Nach Gebrauch den leeren Applikator im Hausmüll entsorgen.

Frei von Prarbenen.

Hinweise:

Falls es bei der Anwendung von Prefert® Vaginal Gel zu Reizungen kommt, beenden Sie die Anwendung und sprechen mit Ihrer Ärztin bzw. Ihrem Arzt.

Bitte für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Benutzen Sie Prefert® Vaginal Gel nicht, wenn Sie vor kurzem einen vaginalen Eingriff hatten oder eine akute vaginale Infektion haben.

Gel vaginal Prefert® pour désir d'enfant

Mode d'action :

Le gel vaginal Prefert® crée un environnement dans lequel les spermatozoïdes peuvent se mouvoir de manière optimale vers l'ovule.

Ses propriétés osmotiques offrent une marge de manœuvre optimale. En favorisant la mobilité des spermatozoïdes, ce gel est l'aide idéale pour atteindre avec succès l'ovule.

Avec un pH neutre de 7,2, Prefert® protège les spermatozoïdes d'un environnement trop acide, garantissant ainsi leur survie.

Le gel vaginal Prefert® améliore la mobilité des spermatozoïdes en comparaison avec les lubrifiants classiques hydrosolubles.

Durée d'utilisation :

À utiliser temporairement lors des trois jours les plus féconds du cycle féminin (moment de l'ovulation).

Utiliser uniquement pendant 24 heures.

Composants :

Eau purifiée, chlorure de sodium, phosphate de sodium, phosphate de potassium, arabinogalactane, hydroxyéthylcellulose, polyhexanide

Utilisation :

Introduire 5 minutes avant le rapport sexuel.

1. Avant le rapport sexuel, sortez un applicateur à usage unique du gel vaginal Prefert® de l'emballage.
2. Retirez le bouchon de fermeture.
3. Introduisez l'applicateur vaginal dans le vagin. Pressez l'applicateur pour introduire le gel. Retirez l'applicateur.
4. Vous pouvez maintenant avoir le rapport sexuel.

Le contenu de l'emballage suffit pour 8 utilisations.

Après utilisation, jetez l'applicateur vide à la poubelle.

Sans parabène.

Indications :

En cas d'irritations lors de l'utilisation du gel vaginal Prefert®, arrêtez l'utilisation et consultez votre médecin.

Tenir hors de portée des enfants.

Ne pas utiliser le gel vaginal Prefert® en cas d'opération vaginale récente ou d'infection vaginale aiguë.

Prefert® Vaginale gel bij kinderwens

Werkwijze:

Prefert® vaginale gel creëert een milieu waarin spermacellen optimaal naar de eicel kunnen bewegen.

Zijn osmotische eigenschappen zorgen voor optimale bewegingsruimte. Dat stimuleert de beweeglijkheid van de spermacellen en is een ideaal hulpmiddel voor het succesvol bereiken van de eicel.

Met een neutrale pH-waarde van 7,2 beschermt Prefert® de spermacellen tegen een te zuur milieu en garandeert zo dat ze kunnen overleven.

Prefert® vaginale gel verbetert de beweeglijkheid van de spermacellen vergeleken met klassieke, in water oplosbare glijmiddelen.

Toepassingstijd:

Voor het tijdelijk gebruik op de drie meest vruchtbare dagen van de vrouwelijke cyclus (tijdstip van de ovulatie).

Slechts één keer in 24 uur gebruiken.

Inhoudsstoffen:

Gezuiverd water, natriumchloride, natriumfosfaat, kaliumfosfaat, arabinogalactaan, hydroxyethylcellulose, polyhexanide

Gebruik:

5 minuten vóór het geslachtsverkeer aanbrengen.

1. Haal vóór het geslachtsverkeer een eenmalige applicator Prefert® vaginale gel uit de verpakking.
2. Verwijder de afsluitdop.
3. Breng de vaginale applicator in de schede in. Knijp de applicator samen om de gel in te brengen. Verwijder de applicator
4. Nu kunt u geslachtsverkeer hebben.

De inhoud van de verpakking is voldoende voor 8 toepassingen.

Na gebruik de lege applicator met het huishoudelijk afval weggooiën.

Bevat geen parabenen.

Aanwijzingen:

Als bij het gebruik van Prefert® vaginale gel irritaties ontstaan, mag u deze niet meer gebruiken en moet u uw arts raadplegen.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Gebruik Prefert® vaginale gel niet wanneer u onlangs een vaginale ingreep hebt ondergaan of een acute vaginale infectie hebt.

Prefert® Gel vaginale di ausilio alla procreazione

Meccanismo d'azione

Prefert® Vaginal Gel crea un ambiente in cui gli spermatozoi possono scorrere ottimamente fino a raggiungere gli ovuli.

Le sue caratteristiche osmotiche offrono uno spazio di movimento ottimale. Facilita la mobilità degli spermatozoi ed è un aiuto ideale per facilitare il raggiungimento dell'ovulo.

Con un pH neutro di 7,2 Prefert® protegge gli spermatozoi contro un ambiente troppo acido assicurandone così la sopravvivenza.

Prefert® Vaginal Gel migliora la mobilità degli spermatozoi rispetto ai classici lubrificanti idrosolubili.

Tempo di applicazione

Per l'applicazione temporanea nei tre giorni più fertili del ciclo femminile (periodo dell'ovulazione).

Applicare una sola volta nell'arco delle 24 ore.

Ingredienti

Acqua purificata, cloruro di sodio, fosfato di sodio, fosfato di potassio, arabinogalattano, idrossietilcellulosa, polisesanide

Applicazione

Introdurre il gel 5 minuti prima del rapporto sessuale.

1. Estrarre un applicatore monouso Prefert® Vaginal Gel dalla confezione prima del rapporto sessuale.
2. Togliere il tappo.
3. Introdurre l'applicatore vaginale nella vagina. Premere l'applicatore per introdurre il gel. Togliere l'applicatore.
4. Adesso si può iniziare il rapporto sessuale.

Il contenuto della confezione è sufficiente per 8 applicazioni.

Dopo l'uso smaltire l'applicatore nei rifiuti domestici.

Senza parabeni.

Avvertenze

In caso di irritazioni durante l'applicazione di Prefert® Vaginal Gel, sospendere l'applicazione e consultare il proprio medico.

Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

Non usi Prefert® Vaginal Gel se ha avuto un intervento vaginale di recente o se ha un'infezione vaginale acuta.



Nicht zur Wiederverwendung / Ne pas réutiliser / Niet voor hergebruik / Non riutilizzabile



Abfall / Déchets / Afval / Rifiuti generici



Vor Nässe schützen / Protéger de l'humidité / Beschermen tegen vocht / Proteggere dall'umidità



Temperaturbegrenzung / Limite de température / temperatuurgrens / Limite di temperatura



Medizinprodukt / Dispositif médical / Medisch hulpmiddel / Prodotto medicale



KESSEL medintim GmbH
Kelsterbacher Str. 28
64546 Mörfelden-Walldorf
Germany



Made in Germany

www.medintim.de



GEL PREFERT8

PZN: 16240798



Prefert®

Vaginal Gel

free of
silicones,
parabens &
mineral
oils

Medizinprodukt bei Kinderwunsch während der Ovulation zur häuslichen Anwendung

Dispositif médical en cas de désir d'enfant pendant l'ovulation, pour une utilisation domestique

Medisch hulpmiddel bij kinderwens tijdens de ovulatie voor gebruik thuis

Dispositivo medico per facilitare la procreazione durante l'ovulazione, per uso a domicilio

www.prefert.com

Medintim