

Deutsch

English

Français

Italiano

Español

Nederlands

Dansk

עברית

Sylk

Das natürliche Gleitgel aus dem Saft der Kiwipflanze hat sich seit Jahrzehnten als rein pflanzliches und daher gut verträgliches Gleitmittel bewährt. Sylk® ist frei von tierischen Bestandteilen, Hormonen, Silikonen und Parabenen.

Gebrauchsanweisung
Vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung lesen.

Zusammensetzung
Gereinigtes Wasser, Natriumzitrat, Zitronensäure, Kaliumsorbat, Grapefruitkernextrakt, Glycerin, Kiwifrucht-extrakt, Xanthan Gum

Indikationen
Sylk® dient der Verbesserung der Gleitfähigkeit während des Geschlechtsverkehrs. Es ist auf Kondomen, zum Einführen von Tampons, Thermometern und Hilfsmitteln zur sexuellen Stimulation geeignet.

Kontraindikationen
Bekannte Überempfindlichkeit gegenüber dem Produkt. Im Falle einer Vaginalinfektion fragen Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Produkt verwenden.

Anwendung
Die individuell benötigte Menge wird direkt auf die Haut aufgetragen oder mittels Finger an die gewünschte Stelle gebracht. Sylk® sollte aufgrund seines leicht sauren pH-Werts von 4,4 – 4,7 nicht bei Kinderwunsch verwendet werden. In dieser Phase empfehlen wir daher Prefert® Vaginalgel zum Optimieren der Fruchtbarkeit. Dieses Produkt ist wasserlöslich, geruchsneutral und fettfrei und dadurch mit Kondomen aus Naturkautschuk-latex, Polyurethan und Polyisopren verträglich. Sylk® ist zur vaginalen Anwendung geeignet.

Falls die Packung Beschädigungen aufweist, die die Unversehrtheit der Tube beeinträchtigen, verwenden Sie das Produkt nicht. Dieses Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Nebenwirkungen
Bislang liegen keine Meldungen über Nebenwirkungen vor.

Sylk

The natural lubricant from the juice of the kiwi plant has been proven for decades as a purely plant-based and thus well-tolerated lubricant. Sylk® is free of animal components, hormones, silicones and parabens.

Instructions for use
Read the instructions for use prior to application.

Composition
Purified water, sodium citrate, citric acid, potassium sorbate, grapefruit seed extract, vegetable glycerine, kiwi fruit polysaccharide gum, xanthan gum

Indications
Sylk® is used to improve lubrication during sexual intercourse. It is suitable for use on condoms, for inserting tampons, thermometers and aids for sexual stimulation.

Contraindications
Known hypersensitivity to the product. In cases of vaginal infection, consult your doctor before using the product.

Directions
The amount individually needed is applied directly to the skin or to the desired site with a finger. Because of its mildly acid pH of 4.4 – 4.7, Sylk® should not be used when trying to conceive. In this phase, we recommend using Prefert® Vaginal Gel instead to optimize fertility.

This product is water-soluble, odorless and non-greasy and therefore it is compatible with condoms made of natural rubber latex, polyurethane and polyisoprene. Sylk® is suitable for vaginal use.

If the packaging is damaged such that the tube is no longer intact, do not use the product. Keep this medical device out of reach of children.

Side effects
There are no reports of side effects to date.

Sylk

Ce gel lubrifiant naturel, obtenu à partir de la sève de l'arbre à kiwi, a fait ses preuves depuis des décennies comme lubrifiant purement végétal et par conséquent bien toléré. Sylk® est sans ingrédients d'origine animale, sans hormone, sans silicone et sans parabène.

Mode d’emploi
Lire la notice avant l’utilisation.

Composition
Eau purifiée, citrate de sodium, acide citrique, sorbate de potassium, extrait de pépins de pamplemousse, glycérine, extrait de kiwi, gomme xanthane.

Indications
Sylk® est destiné à améliorer la lubrification pendant les rapports sexuels. Convient aux préservatifs, à l'introduction de tampons, de thermomètres et d'accessoires de stimulation sexuelle.

Contre-indications
Hypersensibilité connue au produit. En cas d'infection vaginale, consultez votre médecin avant d'utiliser le produit.

Utilisation
Appliquer la quantité individuelle nécessaire directement sur la peau ou sur la zone souhaitée à l'aide des doigts. En raison de son pH légèrement acide (4,4 à 4,7), Sylk® ne doit pas être utilisé en cas de désir d'enfant. Nous recommandons par conséquent d'utiliser, pendant cette phase, le gel vaginal Prefert® pour augmenter la fertilité.

Ce produit, hydrosoluble, sans odeur et non gras est donc toléré en utilisation avec des préservatifs en latex de caoutchouc naturel, en polyuréthane et en polyisoprène. Sylk® convient à l'application vaginale.

Ne pas utiliser le produit si l'emballage présente des dommages qui nuisent à l'intégrité du tube. Dispositif médical à tenir hors de portée des enfants.

Effets secondaires
Jusqu'à présent, aucun effet secondaire n'a été signalé.

Sylk

Il gel lubrificante naturale ricavato dal succo della pianta di kiwi si è affermato da decenni come lubrificante completamente vegetale e, quindi, ben tollerato. Sylk® è privo di componenti di origine animale, ormoni, siliconi e parabeni.

Istruzioni per l’uso
Prima dell'impiego, leggere le istruzioni per l'uso.

Composizione
Acqua purificata, citrato di sodio, acido citrico, sorbato di potassio, estratto di semi di pompelmo, glicerina, estratto di kiwi, gomma di xantano

Indicazioni
Sylk® è destinato al miglioramento della scorrevolezza durante i rapporti sessuali. È adatto per l'applicazione sul preservativo, per l'introduzione di tamponi, termometri e ausili per la stimolazione sessuale.

Controindicazioni
Ipersensibilità nota al prodotto. In caso di infezione vaginale, chiedere al medico prima di utilizzare il prodotto.

Uso
Applicare la quantità individualmente necessaria direttamente sulla cute o con le dita sul punto desiderato. A causa del suo pH lievemente acido di 4,4 – 4,7, Sylk® non va usato se si desidera avere un bambino. In questa fase, raccomandiamo quindi Prefert® gel vaginale per ottimizzare la fertilità.

Questo prodotto è idrosolubile, ha un odore neutro, è privo di grassi ed è, quindi, compatibile con i preservativi in lattice di gomma naturale, poliuretano e polisoprene. Sylk® è adatto all'uso vaginale.

Se la confezione presenta dei danni che compromettono l'integrità del tubo, non utilizzare il prodotto. Conservare questo dispositivo medico fuori dalla portata dei bambini.

Effetti collaterali
Finora non sono stati riportati effetti collaterali.

Sylk

El lubricante natural hecho de la savia de la planta kiwi ha demostrado durante décadas su eficacia como lubricante puramente vegetal y, por lo tanto, bien tolerado. Sylk® no contiene ingredientes de origen animal, hormonas, siliconas ni parabenos.

Modo de uso
Antes de utilizarlo leer las instrucciones de uso.

Composición
Acqua purificada, citrato de sodio, ácido cítrico, sorbato de potasio, extracto de semilla de pomelo, glicerina, extracto de kiwi, goma xantana

Indicaciones
Sylk® contribuye a mejorar la lubricación durante las relaciones sexuales. Es apto para su aplicación en el preservativo y para la introducción de los tampones, el termómetro y los dispositivos para la estimulación sexual.

Contraindicaciones
Hipersensibilidad conocida al producto. En caso de infección vaginal consulte a su médico antes de usar el producto.

Aplicación
Aplicar la cantidad necesaria directamente sobre la piel o en la zona deseada con los dedos. Por su valor de pH ligeramente ácido de 4,4 – 4,7, Sylk® no se debería usar en el caso de que se desee un embarazo. Para esta fase recomendamos el gel vaginal Prefert®, porque mejora la fertilidad.

Este producto es hidrosoluble, no tiene olor y no contiene grasa, por eso es compatible con los preservativos de látex de caucho natural, poliuretano y poliisopreno. Sylk® está indicado para la aplicación vaginal.

No use el producto si el envase presenta daños que afectan a la integridad del tubo. Mantener este producto sanitario alejado del alcance de los niños.

Efectos secundarios
Hasta la fecha no se ha comunicado ningún efecto secundario.

Sylk

De natuurlijke glijgel uit het sap van de kiwiplant heeft zich al tientallen jaren bewezen als puur plantaardig en derhalve goed verdraagbaar glijmiddel. Sylk® bevat geen dierlijke bestanddelen, hormonen, siliconen en parabenen.

Gebruiksaanwijzing
Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing door.

Samenstelling
Gezuiverd water, natriumcitraat, citroenzuur, kaliumsorbaat, grapefruitextract, glycerine, kiwivruchtexttract, xanthaangom

Indicaties
Sylk® is bedoeld voor de verbetering van het glijvermogen tijdens de geslachtsgemeenschap. Geschikt op condooms, voor het inbrengen van tampons, thermometers en hulpmiddelen voor seksuele stimulatie.

Contra-indicaties
Bekende overgevoeligheid voor het product. Raadpleeg bij een vaginale infectie eerst uw arts voordat u het product gebruikt.

Gebruik
De individueel benodigde hoeveelheid wordt rechtstreeks op de huid of met vingers op de gewenste plek aangebracht. Sylk® dient vanwege de licht zure pH-waarde van 4,4 à 4,7 niet bij een kinderwens te worden gebruikt. In deze fase adviseren we daarom Prefert® vaginale gel voor het optimaliseren van de vruchtbaarheid.

Dit product is oplosbaar in water, geurloos en vetvrij en daardoor geschikt voor gebruik met condooms van natuurlijk rubberlatex, polyurethaan en polyisopreen. Sylk® is geschikt voor vaginaal gebruik.

Gebruik het product niet als de verpakking beschadigingen heeft die de ongeschonden staat van de tube aantasten. Bewaar dit medisch hulpmiddel buiten het bereik van kinderen.

Bijwerkingen
Tot op heden zijn er geen bijwerkingen gemeld.

Sylk

Det naturlige glidegel, fremstillet af saften fra kiwiplanten, er et rent vegetabilsk glemiddel og såles dermed rigtig godt. Sylk® indeholder ingen animalske stoffer, hormoner eller silikone og heller intet paraben.

Brugsanvisning
Læs brugsanvisningen før brug.

Sammensætning
Renset vand, natriumcitrat, citronsyre, kaliumsorbat, grapefruitskeekstrakt, glycerin, kiwifrugtekstrakt, xanthan gum

Indikationer
Sylk® har til formål at forbedre glideevnen under samleje. Midlet er egnet til påføring på kondomer, til indføring af tamponer, termometre og hjælpemidler til seksuel stimulation.

Kontraindikationer
Kendt overfølsomhed over for produktet. I tilfælde af en infektion i skeden skal du rådføre dig med din læge, før du bruger produktet.

Anvendelse
Den individuelt nødvendige mængde påføres direkte på huden eller påføres med fingeren på det ønskede sted. Sylk® bør ikke anvendes, hvis man ønsker at blive gravid på grund af den noget sure pH-værdi på 4,4 – 4,7. I denne periode anbefaler vi derfor Prefert® vaginalgel for at optimere frugtbarheden.

Dette produkt er vandopløseligt, lugtneutralt og fedtfrit og såles derfor godt af kondomer, fremstillet af naturgummilætex, polyurethan og polyisopren. Sylk® er egnet til vaginal brug. Såfremt pakningen er beskadiget og som følge heraf en beskadiget tube, må produktet ikke anvendes. Dette medicinske produkt skal opbevares utilgængeligt for børn.

Der foreligger hidtil ingen informationer om bivirkninger.

גיל ההחלקה הטבעי הממיץ של קיווי הכיח את עצמו מזה עשרות בשנים כחומר סיכה ממקור צמחי טהור, ולכן נסבל היטב. Sylk® חופשי מחומרים שמקורם מן החי, מהורמונים, סיליקון ופראבן.

הוראות שימוש
לפני השימוש יש לעיין בהוראות השימוש.

הרכב
מים מטוהרים, סודיום ציטראט, חומצת לימון, אשלגן סורבתי, מיצוי מגרעיני אשכולית, גליצרין, מיצוי מפירות קיווי, גומי קסנטאן.

התוויות
Sylk® משמש לשיפור הסיכה בזמן המגע המיני הוא מתאים למריחה על קונדומים, להחדרת טמפונים, מרחום או עזרים לגירוי מיני.

הריות נגד
קיום של גרישות יתר ידועה למוצר. במקרה של זיהומים לדניים, יש להיועץ ברופא בטנם משתמשים במוצר.

אופן השימוש
יש למשוח את הכמות הדרושה הנקיבעת באופן פרטני ישירות על העור או לשים באצבע במקום הדרוש. בשל ערך הp בין 4.4 ל- 4.7 המנטש נמוך, לא רצוי להשתמש ב-Sylk® כאשר מעוניינים בהריון. בשלב זה, אנו ממליצים על הגיל הלדני Prefert® להגברת הפוריות מוצר זה מסיס במים, חסר ריח ואינו מכיל שומן, ולכן הוא מתאים לשימוש יחד עם קונדומים העשויים לטקס טבעי, פוליאורטן או פולי-איזופרן.

Sylk® מתאים לשימוש בלדן. אין להשתמש במוצר אם האריזה פגוי מה בצורה היכולה להזיק לשלמות השפופרת. יש לשמור מוצר רפואי זה מחוץ להישג ידם של ילדים.

תופעות לוואי
עד כה לא נודע על תופעות לוואי כלשהן.

Sylk

Det naturliga glidmedlet av växtsaft från kiwiplantan är sedan årtionden beprövat som ett helt växtbaserat och således väl tolererat glidmedel. Sylk® är fritt från animaliska beståndsdelar, hormoner, silikoner och parabener.

Bruksanvisning
Läs bruksanvisningen före användning.

Sammansättning

Renat vatten, natriumcitrat, citron-syra, kaliumsorbit, grapefruktkärn-extrakt, glycerin, kiwifruktextrakt, xantangummi.

Indikationer

Sylk® är avsett att öka glidförmågan under samlag. Lämpligt att använda med kondom, vid införande av tamponger, termometer och som hjälpmedel för sexuell stimulering.

Kontraindikationer

Känd överkänslighet mot produkten. Vid vaginal infektion ska du kontakta läkare innan du använder produkten.

Användning

Applicera den mängd som krävs direkt på huden eller med ett finger på önskat ställe. Sylk® ska på grund av ett något surt pH-värde på 4,4 – 4,7 inte användas vid önskan att bli gravid. Under den fasen rekommenderar vi istället Prefert® Vaginalgel för att optimera fertiliteten.

Denna produkt är vattenlöslig, doftneutral och fettfri och kan således användas med kondomer av naturgummi, polyuretan och polyisopren. Sylk® är avsett för vaginal användning.

Om förpackningen är skadad och detta kan ha påverkat tuben ska produkten inte användas. Denna medicintekniska produkt ska förvaras utom räckhåll för barn.

Biverkningar

Fram till idag finns inga rapporter om biverkningar.

Sylk

Den naturlige glideegelen av saften fra kiwiplanten har vist seg som et rent vegetarisk og dermed godt tolerert glidemedel. Sylk® er frr i for dyrebestanddeler, hormoner, silikoner og parabener.

Bruksanvisning
Les bruksanvisningen før bruk.

Sammensetning

Renset vann, natriumcitrat, sitronsyre, kaliumsorbit, grapefruktkjerneekstrakt, glycerin, kiwifruksekstrakt, xantan-gummi

Indikasjoner

Sylk® er beregnet til forbedring av glidningen under samleie. Egner seg til bruk på kondomer, til innføring av tamponger, termometere og hjelpemidler til seksuell stimulasjon.

Kontraindikasjoner

Kjent overfølsomhet overfor produktet. I tilfelle en vaginal infeksjon rådfør lege før du bruker produktet.

Anvendelse

Den individuelt nødvendige mengden påføres direkte på huden eller ved bruk av en finger på ønsket sted. Sylk® skal på grunn av den litt sure pH-verdien på 4,4 – 4,7 ikke brukes hvis det er ønske om barn. I denne fasen anbefaler vi derfor Prefert® vaginalgel for å optimere fertiliteten.

Dette produktet er vannløselig, lukt- nøytralt og fettfritt og dermed kompatiblel med kondomer i naturkautsjukla- teks, polyuretan og polyisopren. Sylk® er egnet til vaginal bruk.

Hvis pakningen oppviser skader som reduserer integriteten til tuben, ikke bruk produktet. Dette legemidlet skal oppbevares utilgjengelig for barn.

Bivirkninger

Hittil foreligger ingen rapporter om bivirkninger.

Sylk

Přirodní lubrikační gel ze šťávy kiwi-ovníku se již po staletí osvědčuje jako čisté rostlinný a proto dobře snášenlivý lubrikační prostředek. Sylk® neobsahuje složky živočišného původu, hormony, silikony a parabeny.

Návod k použití
Před použitím si přečtěte návod k použití.

Složení

Čistěná voda, citrát sodný, kyselina citronová, sorban draselný, výtažek z jáderek grapefruitu, glycerin, výtažek z plodů kiwi, xantánová guma

Indikace

Sylk® slouží k lepší lubrikaci při pohlav- ním styku a může zvyšovat příjemné pocity. Je také vhodný k použití s kondomy, k zavádění tampónů, teplo- měřů a pomůcek pro sexuální stimulaci.

Kontraindikace

Známa přecitlivělost vůči výrobku. V případě vaginální infekce se poraďte s lékařem, než výrobek použijete.

Použití

Individuálně potřebné množství se n- aší přímo na pokožku nebo se pomocí prstů nanese na požadované místo. Sylk® by se vzhledem k mírně kyselé hodnotě pH 4,4 – 4,7 neměl používat v případě snahy o otěhotnění. V této fázi proto doporučujeme vaginální gel Prefert® k optimalizaci plodnosti.

Tento výrobek je rozpustný ve vodě, pachově neutrální a neobsahuje tuky a proto je snášenlivý na kondomy z latexu z přírodního kaučuku, polyure- tanu a polyisoprenu. Sylk® je vhodný k vaginálnímu použití.

Pokud balení vykazuje poškození, které narušuje neporušenost tuby, výrobek nepoužívejte. Tento zdravotnický prostředek je třeba uchovávat mimo dosah dětí.

Nežádoucí účinky

Dosud nebyly hlášeny žádné nežádoucí účinky.

Sylk

Naturalny nawilżający żel intymny z soku rośliny kiwi sprawdził się od dziesięcioleci jako wyłącznie roślinny i dlatego dobrze tolerowany nawilżający żel intymny. Żel Sylk® nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego, hormonów, silikonów ani parabenów.

Instrukcja użycia
Przed użyciem należy przeczytać instrukcję użycia.

Skład

Woda oczyszczona, cytrynian sodu, kwas cytrynowy, sorbinian potasu, wyciąg z pestek grejpfruta, gliceryna, wyciąg z owoców kiwi, guma ksantanoa

Wskazania

Żel Sylk® jest przeznaczony do poprawy nawilżenia podczas stosunku płciowe- go. Nadaje się do stosowania na prezer- watywy, do wprowadzania tamponów, termometrów i środków pomocniczych do stymulacji seksualnej.

Przeciwwskazania
Stwierdzona nadwrażliwość na pro- dukt. W przypadku zakażenia pochwy należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem produktu.

Sposób użycia

Indywidualnie wymaganą ilość należy nałożyć bezpośrednio na skórę lub palec wprowadzić w żądane miejsce. Ze względu na lekko kwaśną wartość pH 4,4 – 4,7 żelu Sylk®, nie należy go używać w przypadku planowania ciąży. W tej fazie zalecamy z tego względu stosowanie żelu dopochwowego Prefert® w celu optymalizacji płodności.

Produkt jest rozpuszczalny w wodzie, ma neutralny zapach i nie zawiera tuszczu. W związku z tym można go stosować z prezerwatywami wykonana- nymi z lateksu kauczuku naturalnego, poliuretanu i poliizoprenu. Żel Sylk® jest przeznaczony do podania dopo- chwowego.

Jeśli opakowanie wykazuje uszkodzenia wpływające na integralność tuby, nie należy używać produktu. Niniejszy wyrób medyczny należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocz- nym dla dzieci.

Działania uboczne

Dotychczas nie zaobserwowano żad- nych działań ubocznych.

Sylk

Kivi bitkisinin suyundan elde edilen doğal kayganlaştırıcı jel, onlarca yıldır tamamen bitkisel ve bu sayede oldukça iyi tolere edilebilen bir kayganlaştırıcı olarak kendini kanıtlamıştır. Sylk® hayvansal bileşenler, hormon, silikon ve paraben içermez.

Kullanım kılavuzu
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz.

Bileşim

Saf su, sodyum sitrat, sitrik asit, potasyum sorbat, greyfurt çekirdeği ekstresi, glicerin, kivi meyvesi ekstresi, ksantan gumu

Endikasyonlar

Sylk® cinsel ilişki esnasında kayganlığın iyileştirilmesini. Ürün, prezervatiflerin üzerinde ve tamponların, termometre- lerin ve cinsel uyarıcı araçların yerleşti- rilmesinde kullanım için de uygundur.

Kontrendikasyonlar

Ürüne karşı bilinen bir hassasiyet. Vajinal enfeksiyonun mevcut olduğu durumlarda ürünü kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Kullanım

Bireysel olarak ihtiyaç duyulan miktar doğrudan cildin üzerine sürülür veya parmaklarla istenilen bölgeye getirilir. Sylk® 4,4 – 4,7 aralığındaki hafif asidik pH değeri sebebi ile çocuk sahibi olma isteğinin bulunduğu durumlarda kulla- nılmamalıdır. Bu nedenle bu dönemde doğurganlığın optimize edilmesi için Prefert® vajinal jelin kullanılmasını önermekteyiz.

Bu ürün suda çözünebilir, kokusuzdur ve yağ içermez, bu sayede doğal kauçuk lateksten, poliüretandan ve poliizoprenden üretilmiş prezervatif- lerle uyumludur. Sylk® vajinal uygulama için uygundur.

Paket, tüpün sağlamlığını etkileyecek şekilde hasar görmüş ise ürünü kul- lanmayınız. Bu tıbbi ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza ediniz.

Yan etkiler

Şu ana kadar herhangi bir yan etki bildirilmemiştir.

سيلك Sylk

هلام مزلق طبيعي من عصير نبات الكوي، أثبتت نفسه على مدى عقود كمادة مزلفة نباتية نقية ومتوافقة. سيلك خالٍ من المكونات الحيوانية والهرمونات والسيليكون والبارابينات.

تعليمات الاستخدام
يجب قراءة تعليمات الاستخدام قبل الاستعمال

التركيب

ماء نقي، سترات الصوديوم، حمض السيترك، سوربات البوتاسيوم، خلاصة بذور الجريب فروت، غليسيرين، خلاصة الكوي، صمغ الزانثان.

الاستخدامات

يساعد سيلك على تحسين كفاءة الإنزلاق خلال عملية الجماع.

يصلح أيضاً للاستخدام مع

الواقي الذكري والسدادات الفظنية وموازين الحرارة والمواد المساعدة على التحفيز الجنسي.

موانع الاستعمال

فرط الحساسية المعروفة للمنتج. في حالات العدوى المهبلية استشريري طبيبك قبل استخدام المنتج.

الاستخدام

يتم استعمال الكمية المطلوبة مباشرة على الجلد أو جلبها إلى الموضع المطلوب بواسطة

الاصبع. لا ينبغي ان تستخدمي سيلك عند وجود الرغبة في الحصول على الأطفال وذلك بسبب قيمته الهيدروجينية الحمضية قليلاً والتي تتراوح بين 4,4 و 4,7 . في هذه المرحلة نوصي لتحسين « بريفرت » باستخدام الهلام المهبلي الخصوية.

هذا المنتج قابل للتدويان في الماء وعديم الرائحة وخالي من الدهون وبالتالي فهو متوافق مع الواقي الذكري المصنوع من المطاط الطبيعي اللاتكس، البولبي يوريثين وبولي ايسوبرين. يصلح سيلك للاستعمالات المهبلية.





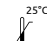


لا تستعمل المنتج في حال وجود اضرار في العلية ان أدت إلى الاضرار بأنوية المنتج. يُحفظ المنتج الطبي بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.




التأثيرات الجانبية

حتى الآن ليس هناك تقارير عن أية اثار جانبية.

التصنيع والتوزيع

شركة كيسيلل المساهمة ذات الضمان المحدود

	<p>Gebruiksaanweisung beachten / Read instructions for use / Consulter la notice / Consultare le istruzioni per l'uso / Consulte las instrucciones de uso / Gebruiksaanwijzing raadplegen/ Brugsanvisningen skal overholdes/ Läs bruksanvisningen / Dodržujte návod k použití / Przestrzegaj instrukcji użycia / Kullanmadan önce uuyulama açlıklmalarını okuyunuz/ قرني تعليمات التطبيق قبل الاستخدام / שי להקפיד על מילוי הוראות השימוש</p>
	<p>Vor Sonneneinstrahlung schützen/ Protect from sunlight / Protéger des rayons du soleil / Tenere al riparo dalla luce solare / Proteger de la radiación solar / Beschermen tegen direct zonlicht / Skäl beskyttes mod sollys / Skyddas mot solljus / Beskyt- tes mot solstrålning / Chraňte před slunečním zářením / Chronić przed działaniem promieni słonecznych / Güneş ışınlarından koruyunuz / يجب حفظه بعيدا عن أشعة الشمس / להגן מפני קרינה של שמש</p>
	<p>Nach Anbruch innerhalb von vier Monaten aufbrauchen / Use within Four months after opening / Une fois ouvert, utiliser avant quatre mois / Utilizzare entro quattro mesi dall'apertura / Una vez abierto, utilizar el producto en un plazo de cuatro meses / Na opening binnen vier maanden opgebruiken / skal for- bruges inden for fire måneder efter åbning / Används inom fyra månader från öppnandet / Skal brukes innen fire måneder etter at pakningen er åpnet / Po otwarciu spotkebujcie do čtyř měsíců / Po pierwszym otwarciu zużyć w ciągu czterech miesięcy / Acıdiktan sonra dört ay içinde kullanınız / يجب استهلاك المحتوى خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بعد فتح الأنيوية. / לאחר הפתיחה ראוי לשימוש במשך ארבע חודשים</p>
	<p>Kennzeichnung Verpackungsmaterial / Packaging material labeling / Marqua- ge matériel d'emballage / Marcatura del materiale da imballaggio / Etiquetado material de embalaje / Eti- kettering van verpakingsmateriaal / Mærkning emballeringsmateriale / Märkning förpackningsmateriale / Mer- king pakningsmateriale / Označení obalového materiálu / Oznakowanie materiału opakowaniowego / Ambalaj materyali isareti / توسيم مواد التغليف / סימן וחומר האריזה</p>
	<p>Temperaturbegrenzung / Tempera- ture limit / Limite de temperatură / Limite de temperatura / Limite de temperatura / Temperaturbegrens / Temperaturbegrensning / Tempera- turgräns / Temperaturbegrensning / Teplotní omezení / Zakres tempera- tur / Sicaklık limiti / בקורת מספר טווח</p>
	<p>Herstellungsdatum / Manufacturing date / Date de fabrication / Data di fabbricazione / Fecha de fabricación / Productiedatum / Produktionsdato / Produktionsdato / Tillverknings- datum / Data produkcji / Datum výroby / Üretim tarihi / تاريخ المصنع / תאריך ייצור</p>
	<p>Chargenbezeichnung / Batch number / Désignation de lot / Codice di lotto / Denominación / Partijaanduiding / Batchbetegnelse / Batchbetegnelse / Satsnummer / Oznaczenie serii / Označení šarže / Parti isareti / علامة الدفعة / תארוך ומספר האצורה</p>

	<p>Verwendbar bis / Expiry date / A utiliser jusqu'au / Utilizzare entro / Fecha de caducidad / Te gebruiken tot / Anvendes inden / Holdbar til / Utgångsdatum / Termin ważności / Použitelnost do / Son kullanim tarihi / صالح للاستعمال حتى / לשימוש עד</p>
	<p>Medizinprodukt / Medical device / Dispositif médical / Dispositivo mé- dico / Dispositivo médico / Medicish hulpmiddel / Medicinsk udstyr / Mediceinteknisk produkt / medisinsk produkt / Zdravotnický prostředek / Wyrób medyczny / Tibbi ürün / جهاز طبي / מוצר רפואי</p>
	<p>Hersteller / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Fabricant / Producent / Tilverkere / Výrobca / Proizvajalec / Produzent / Výrobce / Producent / Üretici / الشركة الصانعة / היצרן</p>

CE

EAN 4013273000178

REF GEL S50


<p>KESSEL medintim GmbH Kelsterbacher Str. 28 64546 Mörfelden-Walldorf Germany service@medintim.de www.medintim.com</p>