

# Animé Lubricant

**Animé Lubricant mit Hyaluron**  
Intimes Gleitmittel für Sie und Ihn

**Gebrauchsanweisung**  
Vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung lesen

## Zusammensetzung

Gereinigtes Wasser, Propylenglycol, Glycerol, Hydroxyethylcellulose, Benzoesäure, Natriumhyaluronat

## Eigenschaften

- auf Wasserbasis
- frei von Silikonen und Parabenen
- farblos
- geruchlos
- pH-Wert 3,5 - 4,5
- enthält Hyaluron

Hyaluron kann die Heilung von Haut und Rissen unterstützen.

## Indikationen

Gel zur Verbesserung der Gleifähigkeit während des Geschlechtsverkehrs. Bei vaginaler Trockenheit. Geeignet auch auf Kondomen, zum Einführen von Tampons, Thermometern und Hilfsmitteln zur sexuellen Stimulation.

## Kontraindikationen

Bekannte Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe. In Fällen einer Vaginalinfektion Fragen Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Produkt verwenden.

## Anwendung

Die individuell benötigte Menge direkt auf die Haut auftragen oder mittels Finger an die gewünschte Stelle bringen.

Dieses Produkt ist mit Kondomen aus Naturkautschuklatex, Polyurethan und Polyisopren verträglich. Es hat **keine** empfängnisverhütende Wirkung.

## Hinweis

Falls die Packung Beschädigungen aufweist, die die Unversehrtheit der Tube beeinträchtigen, verwenden Sie das Produkt nicht. Medizinprodukt für Kinder unzugänglich aufbewahren.


## Nebenwirkungen

Bislang liegen keine Meldungen über Nebenwirkungen vor.

## Herstellung und Vertrieb



KESSEL medintim GmbH  
Kelsterbacher Str. 28  
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany  
service@medintim.de  
[www.medintim.com](http://www.medintim.com)

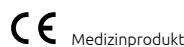

Medizinprodukt

# Animé Lubricant

**Animé lubricant with hyaluronic acid**  
Intimate lubricant for her and him

## Instruction manual

Read the instructions for use before using.

## Composition

Purified water, propylene glycol, glycerol, hydroxyethyl cellulose, benzoic acid, sodium hyaluronate

## Properties

- waterbased
- free of silicones and parabens
- colourless
- odourless
- pH Value 3.5 - 4.5
- contains hyaluron

Hyaluron can support the healing of the skin and tears.

## Indications

Gel to improve lubrication during sexual intercourse. In case of vaginal dryness. Can also be used on condoms and for inserting tampons or thermometers and aids for sexual stimulation.

## Contraindications

Known hypersensitivity to one of the ingredients. In cases of vaginal infection, ask your doctor before using the product.

## Use

Apply the amount individually needed directly to the skin or apply to the desired site with a finger.

This product is compatible with condoms made of natural rubber latex, polyurethane and polyisoprene. It has **no** contraceptive effect.

## Note

If the packaging is damaged such that the tube is no longer intact, do not use the product. Keep medical device out of the reach of children.

## Side effects

There are no reports of side effects to date.

## Manufacture and distribution



KESSEL medintim GmbH  
Kelsterbacher Str. 28  
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany  
service@medintim.de  
[www.medintim.com](http://www.medintim.com)



Medical device

# Animé Lubricant

**Lubrifiant Animé à l'acide hyaluronique**

Gel intime lubrifiant pour elle et pour lui

## Mode d'emploi

Lire la notice avant l'utilisation.

## Composition

Eau purifiée, propylène glycol, glycérol, hydroxyéthyle cellulose, acide benzoïque, hyaluronate de sodium

## Propriétés

- hydrosoluble
- sans silicones et parabènes
- incolore
- inodore
- pH 3,5 - 4,5
- contient de l'hyaluron

L'hyaluron peut favoriser la cicatrisation de la peau et des fissures.

## Indications

Gel destiné à améliorer la lubrification pendant les rapports sexuels. Indiqué en cas de sécheresse vaginale. Convient également aux préservatifs, à l'introduction de tampons, de thermomètres et d'accessoires de stimulation sexuelle.

## Contre-indications

Hypersensibilité connue à l'un des ingrédients. En cas d'infection vaginale, consultez votre médecin avant d'utiliser le produit.

## Utilisation

Appliquez la quantité individuelle nécessaire sur la peau ou sur la zone souhaitée à l'aide des doigts.

Ce produit est compatible avec les préservatifs en latex de caoutchouc naturel, en polyuréthane et en polyisoprène. Il **ne possède pas** de propriétés contraceptives.

## Remarque

Si l'emballage présente des dommages, qui nuisent à l'intégrité du tube, n'utilisez pas le produit. Dispositif médical à tenir hors de portée des enfants.

## Effets secondaires

Jusqu'à présent, aucun effet secondaire n'a été signalé.

## Fabrication et distribution



KESSEL medintim GmbH  
Kelsterbacher Str. 28  
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany  
service@medintim.de  
[www.medintim.com](http://www.medintim.com)



Dispositif médical

# Animé Lubricant

**Animé Lubricant con acido ialuronico**  
Lubrificante intimo per lei e per lui

## Istruzioni per l'uso

Leggere le istruzioni per l'uso prima dell'utilizzo.

## Composizione

Acqua purificata, glicole propilenico, glicerolo, idrossietilcellulosa, acido benzoico, acido ialuronico

## Caratteristiche

- idrosolubile
- senza siliconi e parabeni
- incolore
- inodore
- valore pH 3,5 - 4,5
- contiene ialurone

Lo ialurone può favorire la guarigione della pelle e delle crepe.

## Indicazioni

Gel per migliorare la scorrevolezza durante i rapporti sessuali. Nella secchezza vaginale. Anche per l'applicazione sul preservativo, per l'introduzione di tamponi, termometri e ausili per la stimolazione sessuale.

## Controindicazioni

Ipersensibilità nota ad uno degli ingredienti. In caso di infezione vaginale, chiedere al medico prima di utilizzare il prodotto.

## Uso

Applicare la quantità individualmente necessaria direttamente sulla cute o con le dita sul punto desiderato.

Questo prodotto è compatibile con i preservativi in lattice di gomma naturale, poliuretano e poliisoprene. Non presenta **alcun** effetto contraccettivo.

## Avvertenza

Se la confezione presenta dei danni che compromettono l'integrità del tubo, non utilizzare il prodotto. Conservare il dispositivo medico fuori dalla portata dei bambini.

## Effetti collaterali

Finora non sono stati riportati effetti collaterali.

## Produzione e distribuzione



KESSEL medintim GmbH  
Kelsterbacher Str. 28  
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany  
service@medintim.de  
[www.medintim.com](http://www.medintim.com)



Dispositivo medico

# Animé Lubricant

**Animé Lubricante con Hialurón**  
Lubricante íntimo para ella y para él

## Manual de instrucciones

Lea el manual de uso antes de utilizar el producto.

## Composición

Acqua purificata, propilenglicol, glicerol, hidroxietilcellulosa, ácido benzoico, hialuronato de sodio

## Propiedades

- soluble en agua
- sin siliconas y parabenes
- incoloro
- inodoro
- pH 3,5 - 4,5
- contiene hialuron

El hialurón puede ayudar a la curación della pelle e las grietas.

## Indicaciones

Gel para mejorar la lubricación durante las relaciones sexuales. En caso de sequedad vaginal. Apto también para su aplicación en el preservativo y para la introducción de los tampones, el termómetro y los dispositivos para la estimulación sexual.

## Contraindicaciones

Hipersensibilidad conocida a uno de los ingredientes. En caso de infección vaginal consulte a su médico antes de usar el producto.

## Aplicación

Aplicar la cantidad necesaria directamente sobre la piel o en los dedos para llegar a la zona deseada.

Este producto es compatible con los preservativos de látex de caucho natural, poliuretano y poliisopreno. **No** tiene efecto anticonceptivo.

## Nota

No use el producto si el envase presenta daños que afectan a la integridad del tubo. Mantener este producto sanitario alejado del alcance de los niños.

## Efectos secundarios

Hasta la fecha no se ha comunicado ningún efecto secundario.

## Fabricación y distribución



KESSEL medintim GmbH  
Kelsterbacher Str. 28  
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany  
service@medintim.de  
[www.medintim.com](http://www.medintim.com)



Dispositivo médico

# Animé Lubricant

**Animé Lubricant met hyaluron**  
Intiem glijmiddel voor hem en haar

## Gebruiksaanwijzing

Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing door.

## Samenstelling

Aquaiverd water, propyleenglycol, glycerol, hydroxyethylcellulose, benzoëzuur, natriumhyaluronaat

## Kenmerken

- in water oplosbaar
- vrij van siliconen en parabenen
- kleurloos
- reukloos
- pH-waarde 3,5 - 4,5
- bevat hyaluron

Hyaluron kan de genezing van huid en scheuren ondersteunen.

## Indicaties

Gel voor de verbetering van het glijvermogen tijdens de geslachtsge-meenschap. Bij vaginale droogheid. Ook geschikt op condooms, voor het inbrengen van tampons, thermometers en hulpmiddelen voor seksuele stimulatie.

## Contra-indicaties

Bekende overgevoeligheid voor een van de ingrediënten. Raadpleeg bij een vaginale infectie eerst uw arts voordat u het product gebruikt.

## Gebruik

Breng de individueel benodigde hoeveelheid rechtstreeks aan op de huid of met vingers op de gewenste plek.

Dit product is geschikt voor gebruik met condooms van natuurlijk rubberlatex, polyurethaan en polyisopreen. Het heeft **geen** contra-ceptieve werking.

## Aanwijzing

Gebruik het product niet als de verpakking beschadigingen heeft die de ongeschonden staat van de tube aantasten. Medisch hulpmiddel buiten het bereik van kinderen bewaren.

## Bijwerkingen

Tot op heden zijn er geen bijwerkingen gemeld.

## Productie en distributie



KESSEL medintim GmbH  
Kelsterbacher Str. 28  
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany  
service@medintim.de  
[www.medintim.com](http://www.medintim.com)



Medisch hulpmiddel

# Animé Lubricant

**Animé Lubricant med Hyaluron**  
Intimt glijmiddel til ham og hende

## Brugsanvisning

Læs brugsanvisningen før brug.

## Sammensætning

Renset vand, propylenglycol, glycerol, hydroxyethylcellulose, benzoesyre, natriumhyaluronat

## Karakteristika

- vandopløseligt
- silikonefri og parabenfri
- farveløs
- lugtløs
- ph-værdi 3,5 - 4,5
- indeholder hyaluron

Hyaluron kan understøtte helingen af hud og revner.

## Indikationer

Gel til forbedring af glideevnen under samlejet. Ved tørhed i skeden. Også egnet til påføring på kondomer, til indføring af tamponer, termometre og hjælpemidler til seksuel stimulation.

## Kontraindikationer

Kendt overfølsomhed over for et af indholdsstofferne. I tilfælde af en infektion i skeden skal du rådføre dig med din læge, før du bruger produktet.

## Anvendelse

Den individuelt nødvendige mængde påføres direkte på huden eller påføres med fingeren på det ønskede sted.

Dette produkt tåles godt med kondomer af naturgummilætex, polyurethan og polyisopren. Det har **ingen** svangerskabsforebyggende virkning.

## Bemærk

Såfremt pakningen er beskadiget og som følge heraf en beskadiget tube, må produktet ikke anvendes. Skal opbevares utilgængeligt for børn.

## Bivirkninger

Der foreligger hidtil ingen informationer om bivirkninger.

## Produktion og salg



KESSEL medintim GmbH  
Kelsterbacher Str. 28  
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany  
service@medintim.de  
[www.medintim.com](http://www.medintim.com)



Medicinsk udstyr

## Animé Lubricant

**Animé Lubricant med hyaluronsyra**

Intimt glidmedel för kvinnor och män

### Bruksanvisning

Läs bruksanvisningen före användning.

### Sammansättning

Renat vatten, propylenglykol, glycerol, hydroxietylcellulosa, bensoesyra, natriumhyaluronat

### Särdrag

- vattenlöslig
- Fri från silikonere och parabener
- Färglös
- Luktfri
- pH-värde 3,5 - 4,5
- Innehåller hyaluron

Hyaluron kan främja läkning av hud och sprickor.

### Indikationer

Gel för att öka glidförmågan vid samlag. Vid vaginal torrhet. Även lämplig tillsammans med kondomer, vid införande av tamponger, termometrar och som hjälpmedel för sexuell stimulering.

### Kontraindikationer

Känd överkänslighet mot något innehållsämne. Vid vaginalinfektion, fråga läkaren innan du använder produkten.

### Användning

Applicera den mängd som krävs direkt på huden eller med ett finger på önskat ställe.

Denna produkt kan användas med kondomer av naturgummlatex, polyuretan och polyisopren. Den är **inte** ett preventivmedel.

### Obs

Om förpackningen är skadad på sådant sätt att det kan ha påverkat tuben, ska du inte använda produkten. Zedicin-teknisk produkt som ska förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

### Biverkningar

Fram till idag finns inga rapporter om biverkningar.

### Tillverkare och distributör



KESSEL medintim GmbH  
Kelsterbacher Str. 28  
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany  
service@medintim.de  
**www.medintim.com**



Medicinteknisk produkt

## Animé Lubricant

**Animé Lubricant med hyaluron**

Intimt glidmedel för ham og henne

### Bruksanvisning

Läs bruksanvisningen før bruk.

### Sammensetning

Renset vann, propylenglykol, glyserol, hydroksyetylcellulose, benzosyre, natriumhyaluronat

### Funksjoner

- vannbasert
- fri for silikonere og parabener
- fargeløs
- luktfri
- pH-verdi 3,5 - 4,5
- inneholder hyaluron

Hyaluron kan støtte leging av hud og revner.

### Indikasjoner

Gel for forbedring av glidningen under samleie. Ved vaginal tørrhet. Egner seg også til bruk på kondomer, til innføring av tamponger, termometere og hjelpemidler til seksuell stimulasjon.

### Kontraindikasjoner

Kjent overfølsomhet overfor et av innholdsstoffene. I tilfelle en vaginal infeksjon rådfør lege før du bruker produktet.

### Anvendelse

Den individuelt nødvendige mengden påføres direkte på huden eller ved bruk av en finger på ønsket sted.

Dette produktet er kompatibel med kondomer i naturkautsjuklatsk, polyuretan og polyisopren. Det har **ingen** prevensjonsvirkning.

### Merk

Hvis pakningen oppviser skader som duserer integriteten til tuben, ikke bruk produktet. Legemiddel, oppbevares utilgjengelig for barn.

### Biverkninger

Hittil foreligger ingen rapporter om bivirkninger.

### Produksjon og distribusjon



KESSEL medintim GmbH  
Kelsterbacher Str. 28  
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany  
service@medintim.de  
**www.medintim.com**



medisinsk produkt

## Animé Lubricant

**Animé lubrikant s hyaluronem**

Intimní lubrikant pro ni a pro něj

### Návod k použití

Před použitím si přečtěte návod k použití.

### Složení

Čištěná voda, polypropylenglykol, glycerin, hydroxyetylceluloza, kyselina benzoová, hyaluronát sodný

### Vlastnosti

- na bázi vody
- neobsahuje silikoný a parabeny
- bezbarvý
- bez zápachu
- hodnota pH 3,5 - 4,5
- obsahuje hyaluron

Hyaluron může podpořit hojení pokožky a prasklin.

### Indikace

Gel ke zlepšení klzkosti při pohlavním styku. Při vaginální suchosti. Je vhodný i na kondomy, k zavádění tamponů, teploměrů a pomocných prostředků k sexuální stimulaci.

### Kontraindikace

Známa přecitlivost na některou ze složek. V případě vaginální infekce se před použitím výrobku poradte s lékařem.

### Použití

Tento výrobek lze používat s kondomy z latexu z přírodního kaučuku, polyuretanu a polyisoprenu. **Nemá** antikoncepční účinky.

Tento výrobek lze používat s kondomy z latexu z přírodního kaučuku, polyuretanu a polyisoprenu. **Nemá** antikoncepční účinky.

### Upozornění

Pokud je obal poškozený tak, že je narušena celistvost tuby, výrobek nepoužívejte. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

### Nežádoucí účinky

Dosud nebyly hlášeny žádné nežádoucí účinky.

### Výrobce a dodavatel



KESSEL medintim GmbH  
Kelsterbacher Str. 28  
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany  
service@medintim.de  
**www.medintim.com**



Zdravotnický prostředek

## Animé Lubricant

**Animé substancja nawilżająca z kwasem hialuronowym**

Żel intymny dla kobiet i mężczyzn

### Instrukcja użycia

Przed użyciem należy przeczytać instrukcję użycia.

### Skład

Woda oczyszczona, glikol propylenowy, glikol, hydroksyetylceluloza, kwas benzoesowy, hialuronian sodu

### Cechy

- rozpuszczalny w wodzie
- nie zawiera silikonów ani parabenów
- bezbarwny
- bezzapachowy
- wartość pH 3,5 - 4,5
- zawiera kwas hialuronowy

Kwas hialuronowy może wspomagać gojenie skóry i pęknięć.

### Wskazania

Żel do poprawy poślizgu podczas stosunku pciowego. Z suchością pochwy. Żel nadaje się także do nawilżenia prezerwatyw oraz do wprowadzania tamponów, termometrow i środków pomocniczych do stymulacji seksualnej.

### Przeciwwskazania

Znana nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. W przypadku infekcji pochwy przed użyciem należy zasięgnąć porady lekarza.

### Zastosowanie

Indywidualnie wymaganą ilość żelu nałożyć bezpośrednio na skórę i rozprządzić palcami w pożądanym miejscu.

Produkt można stosować w połączeniu z prezerwatywami z lateksu z naturalnego kauczuku, poliuretanu i poliizoprenu. **Nie ma** działania antykoncepcyjnego. Zastosowanie dopochowe.

### Ważna informacja

Przy uszkodzeniu opakowania, wskazującym na uszkodzenie tubki, wycofać produkt z użytku. To produkt medyczny, należy go więc przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

### Działania uboczne

Dotychczas nie zaobserwowano żadnych działań ubocznych.

### Producent i dystrybutor



KESSEL medintim GmbH  
Kelsterbacher Str. 28  
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany  
service@medintim.de  
**www.medintim.com**



Wyrobó medyczny

## Animé Lubricant

**Hyalüron içerikli Animé Lubricant**

Kadın ve erkek için cinsel kayganlaştırıcı jel

### Kullanım talimatı

Uygulama öncesinde kullanım kılavuzunu okuyunuz.

### Bileşimi

Saf su, propilen glikol, gliserol, hidroksetil selüloz, benzoik asit, sodyum hiyalüronat

### Özellikleri

- suda çözüdür
- Silikon ve paraben içermez
- Renksizdir
- Kokusuzdur
- pH değeri 3,5 - 4,5
- Hyaluron içerir

Hyaluron cildin ve çatlakların iyileşmesini destekleyebilir.

### Endikasyonlar

Cinsel ilişki sırasında kayganlığı artırır. Vajinal kurulukta kullanılır. Prezervatiflerin üzerinde ve tamponların, termometrelerinve cinsel uyarcı yardımcı aletlerin yerleştirilmesine yönelik olarak kullanım için de uygundur.

### Kontrendikasyonlar

İçerik maddelerinden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılık.

Vajinal bir enfeksiyonun söz konusu olduğu durumlarda ürünü kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

### Uygulama

İhtiyaç doğrultusunda gerekli olan miktarı doğrudan cildin üzerine sürünüz ve parmaklarınızla istediğiniziz yere uygulayınız.

Bu ürün doğal kauçuk lateksten, poliüretandan ve poliizoprenden üretilmiş prezervatiflerle uyumludur. Ürünün gebeliği önleyici etkisi **yoktur**.

### İpuçu

Pakette, tüpün sağlamlığını etkileyen bir hasar görülyorsa ürünü kullanmayınız. Tibbi ürünün çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza ediniz.

### Yan etkiler

Şu ana kadar herhangi bir yan etki bildirilmemiştir.

### Üretim ve Dağıtım



KESSEL medintim GmbH  
Kelsterbacher Str. 28  
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany  
service@medintim.de  
**www.medintim.com**



Tıbbi ürün

## Animé Lubricant

**أنيميا مادة مرطقة تحتوي على مادة الهيالورون**

مادة مرطقة للأعضاء التناسلية للرجل والمرأة

### تعليمات الاستخدام

يجب قراءة التعليمات قبل الاستخدام.

### التركيب:

ماء منقى، بروبيلين غليكول، غليسرسول، هيدروكسي إيثيل الملبوز، حمض البنزويك، هيالورونات الصوديوم.

### خصائص

- قابل للذوبان في الماء
- خالية من السليكون والبارابين
- عديم اللون
- عديم الرائحة
- درجة الحموضة 3,5 - 4,5

يحتوي على الهيالورون

يمكن أن يساعد الهيالورون في شفاء الجلد والشقوق.

### الاستطبابات

هلام لتحسين الانزلاق أثناء الجماع. عند جفاف المهبل.

مناسب أيضاً للاستخدام على الوافي الذكري

ولإدخال سدادات الفطن وموازين الحرارة والمواد المساعدة على التهييج الجنسي.

### موانع الاستعمال

فرط الحساسية المعروف لأي من المكونات.

أساسي طبيبك عند وجود عدوى مهبلية قبل استعمال المنتج.

### الاستعمال

تستعمل الكمية المناسبة مباشرة على الجلد أو بواسطة الأصابع على الموضوع المرغوب.

يتوافق هذا المنتج مع الواقيات الذكرية المصنوعة من لاتكس المطاط الطبيعي ويولي يوريثان ويولي إيزوبرين. ليس لها تأثير ممانع للحمل.

### ملاحظة

لا تستعمل المنتج في حال وجود أضرار في العلية إن أدت إلى الإضرار بأنوية المنتج. يحفظ المنتج الطينى بعيدا عن متناول أيدي الأطفال.

### التأثيرات الجانبية

حَتَّى الآن ليس هناك تقارير عن أية آثار جانبية.

### جهاز طبي



KESSEL medintim GmbH  
Kelsterbacher Str. 28  
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany  
service@medintim.de  
**www.medintim.com**



جهاز طبي

	<p>Gebruiksaanwijzing beachten   Read instructions for use   Consulter la notice   Consultare le istruzioni per l'uso   Consulte las instrucciones de uso   Gebruiksaanwijzing raadplegen   Brugsanvisningen skal overholdes   Läs bruksanvisningen   Følg bruksanvisningen   Dodržujte návod k použití   Przeznaczaj instrukcję użycia   Kullananmadan önce uygulama açıklamalarını okuyunuz   اقري تعليمات التطبيق قبل الاستخدام</p>
	<p>Vor Sonneneinstrahlung schützen   Protect from sunlight   Protéger des rayons du soleil   Tenere al riparo dalla luce solare   Proteger de la radiación solar   Beschermen tegen direct zonlicht   Skal beskyttes mot sollys   Skyddas mot solljus   Beskyttes mot solstrålning   Chraňte před slunečním zářením   Chronić przed działaniem promieni słonecznych   Güneş ışınlarından koruyunuz   يجب حفظه بعيدا عن أشعة الشمس</p>
	<p>Nach Anbruch innerhalb von drei Monaten aufbrauchen   Use within three months after opening   Une fois ouvert, utiliser avant trois mois   Utilizzare entro tre mesi dall'apertura   Una vez abierto, utilizar el producto en un plazo de tres meses   Na opening binnen drie maanden opgebruiken   Skal forbruges inden for tre måneder efter åbning   Används inom tre månader från öppnandet   Skal brukes innen tre måneder etter at pakningen er åpnet   Po otwarciu stosować w ciągu trzech miesięcy   Açıldıktan sonra üç ay içinde kullanılmaldır   يجب استهلاك المحتوى خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بعد فتح الأنبوية.</p>
	<p>Kennzeichnung Verpackungsmaterial   Packaging material labeling   Marquage matériel d'emballage   Marcatura del materiale da imballaggio   Etiquetado material de embalaje   Etikettering van verpakingsmateriaal   Mærkning emballeringsmateriale   Märkning förpackningsmateriale   Merking pakningsmateriale   Označení obalového materiálu   Oznakowanie materiału opakowaniowego   Ambalaj materyali işareti   <p>توسيم مواد التعبئة والتغليف</p> </p>
	<p>Lagertemperatur   Temperature limit   Limite de température   Limite di temperatura   Limite de temperatura   Temperaturgrens   Temperaturgräns   Temperaturbegrensning   Teplotní omezení   Zakres temperatur   Sıcaklık limiti   حد درجة الحرارة</p>
	<p>Hersteldatum   Manufacturing date   Date de fabrication   Data di fabbricazione   Fecha de fabricación   Productiedatum   Produktionsdato   Produktionsdato   Tilverkningsdatum   Data produkції   Datum výroby   Üretim tarihi   تاريخ الصنع</p>
	<p>Chargenbezeichnung   Batch number   Désignation de lot   Codice di lotto   Denominación   Partijaanduiding   Batchbetegnelse   Batchbetegnelse   Satsnummer   Oznaczenie serii   Označení sárže   Parti işareti   علامة الدفعة</p>
	<p>Verwendbar bis   Expiry date   A utiliser jusqu'au   Utilizzare entro   Fecha de caducidad   Te gebruiken tot   Anvendes inden   Holdbar til   Utgångsdatum   Termin ważności   Použitelnost do   Son kullanım tarihi   صالح للاستعمال حتى</p>