

Häufige Ursachen von Erektionsstörungen und Impotenz sind:

- Diabetes
- Bluthochdruck /Herz-Kreislaufferkrankungen
- Operationen der Prostata
- Gefäßerkrankungen (Arteriosklerose)
- Herzinfarkt und Schlaganfall
- erhöhte Blutfettwerte
- Depressionen oder andere seelische Erkrankungen
- neurologische Erkrankungen (z. B. Multiple Sklerose, Querschnittslähmung)
- Gefäßerkrankungen der Schwellkörper des Penis
- Nieren- oder Leberinsuffizienz
- Medikamente (z. B. gegen Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, Blutfettsenker, Entzündungshemmer, Antidepressiva, zur Entwässerung)
- Rauchen
- übermäßiger Alkoholkonsum

Lösung:

Bei diesen Erkrankungen ist die Vakuumtherapie eine effiziente, nebenwirkungsarme sowie einfach anzuwendende Alternative zur medikamentösen Therapie.

**Your
sexual
healthcare.**

Die Vakuumtherapie sollte nicht angewendet werden bei:

- Sichelzellenanämie
- Leukämie
- Knochenmarktumoren

Die Vakuumtherapie sollte nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewandt werden bei:

- starken Blutgerinnungsstörungen

Wenn Sie unsicher sind, fragen Sie Ihren Arzt oder rufen uns hierzu an.

Bestellinformationen

Active³
Erection System

Manual
Erection System



Pharmacode: 7772703

EAN 4013273001915
Art.-Nr. AES 3

CE 0483
Medizinprodukt

Pharmacode: 7772704

EAN 4013273001175
Art.-Nr. MES 01

CE
Medizinprodukt

Hersteller:

KESSEL medintim GmbH
Nordendstr. 82 – 84
64546 Mörfelden-Walldorf
Germany

Tel.: +49 6105 20 37 20
Fax: +49 6105 20 37 221

www.medintim.de


Vetrieb in der Schweiz:

Inopharm

Brunnadernstrasse 21
3006 Bern

www.inopharm.ch

Vakuumtherapie bei
Erektiler Dysfunktion
(Impotenz)

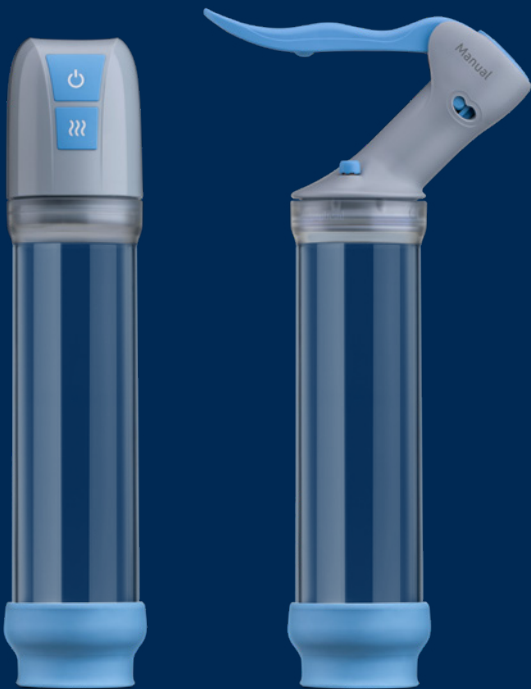


Active³® & Manual
Erection System

Medintim


05.03.2021

Anwendung


Das Active³® Erection System und das Manual Erection System sind medizinische Hilfsmittel für die Vakuumtherapie bei erektiler Dysfunktion (Impotenz). Bei einer Vakuumtherapie wird die Erektion durch Unterdruck ermöglicht. Die Vakuumpumpe erzeugt einen Unterdruck im Zylinder um den Penis.

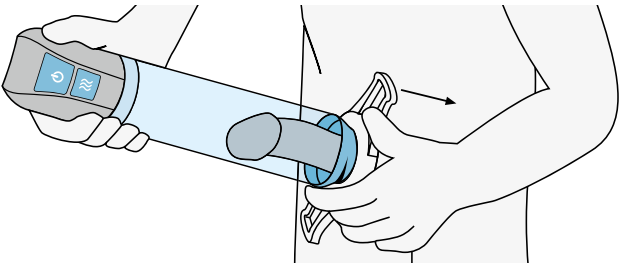

Dazu wird der Zylinder zunächst über den Penis geführt und anschließend mit dem Pumpvorgang begonnen. Durch das dabei entstandene Vakuum wird zusätzlich Blut in den Schwellkörper geleitet. Das führt zu einer Versteifung des Gliedes. Nun wird ein Stauring über den Penischaft gestreift.

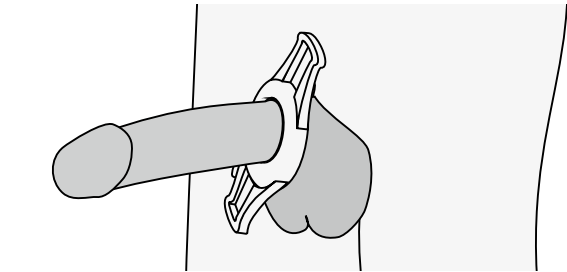

Er verhindert beim Abnehmen des Zylinders den Abfluss des Blutes und hält dadurch die Erektion aufrecht. Mit der so gehaltenen Erektion ist ein normaler und befriedigender Sex möglich. Der Stauring sollte nicht länger als 30 Minuten ohne Unterbrechung getragen werden.

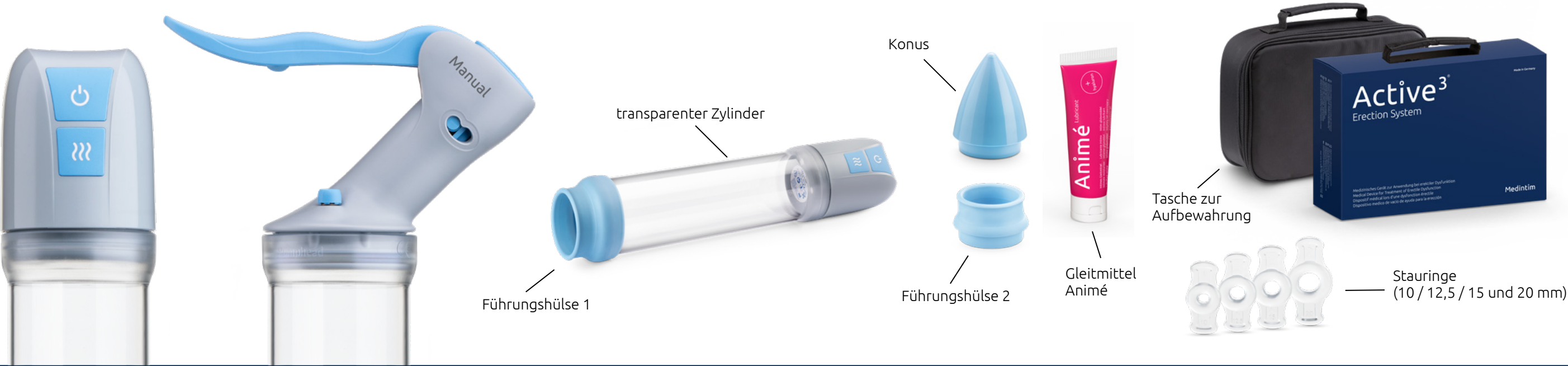

Active³® Erection System

Bestandteile:

- elektrischer, wiederaufladbarer Pumpenkopf
- transparenter Zylinder (Innendurchmesser 53 mm, Länge 200 mm)
- Führungshülse 1 und 2
- Konus (zum Aufschieben eines Stauringes)
- 4 verschiedene Stauringe (Innendurchmesser 10/12,5/15 und 20 mm)
- Ladekabel, USB-Stecknetzteil
- Animé Gleitmittel 50 ml
- Gebrauchsanweisung
- Tasche zur Aufbewahrung

2 Jahre Gewährleistung auf den Pumpenkopf

Manual Erection System

Bestandteile:

- manueller Pumpenkopf
- transparenter Zylinder (Innendurchmesser 53 mm, Länge 200 mm)
- Führungshülse 1 und 2
- Konus (zum Aufschieben eines Stauringes)
- 4 verschiedene Stauringe (Innendurchmesser 10/12,5 / 15 und 20 mm)
- Animé Gleitmittel 50 ml
- Gebrauchsanweisung
- Tasche zur Aufbewahrung

2 Jahre Gewährleistung auf den Pumpenkopf

Unterschiede Active³® und Manual

Wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Systemen ist, dass das **Manual** Erection System leiser (diskreter) einen Unterdruck erzeugt. Das **Active³®** Erection System hingegen ist bequemer in der Anwendung.

Hinweis: Nach einer Prostata-Operation ist das **Manual** Erection System die erfolgreichere Lösung.

Beide Geräte sind untereinander kompatibel, d.h. der Pumpenkopf passt jeweils auch immer auf den Zylinder des anderen Systems.

Beide Geräte sind qualitativ hochwertige, zertifizierte Medizinprodukte, hergestellt in Deutschland. Die Bestellung von Ersatzteilen und Beratung sind auch nach dem Erwerb jederzeit möglich.

Made in Germany

Vorteile

- Wiederherstellung der erektilen Funktion
- signifikante Verbesserung der Heilungserfolge (Durchblutung) z. B. nach Prostata-OP
- keine bekannten Nebenwirkungen
- kann beliebig oft und langjährig angewendet werden
- kostengünstig
- keine Wechselwirkungen mit Medikamenten
- einfache und sichere Anwendung
- kann als erstattungsfähiges Hilfsmittel vom Arzt verordnet werden

Das **Active³®** und das **Manual** Erection System sind von den Krankenkassen anerkannte Hilfsmittel und können vom Arzt verordnet werden. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber.