

Mode d'emploi:

Veuillez lire ce mode d'emploi avant d'utiliser **Anneaux d'érection** pour la première fois. Cet article peut, en cas d'utilisation non conforme, occasionner des blessures.

Information sur le produit:

Anneaux d'érection est un article destiné aux hommes souffrant d'impuissance (dysfonction érectile) légère. Il est destiné à une amélioration de l'érection. Il est utilisé par des hommes qui ne sont pas satisfaits de la qualité de leur érection ou par des hommes dont la qualité de l'érection ne dure pas suffisamment pour un rapport sexuel.

Qu'est ce que la dysfonction érectile (impuissance)?

L'impuissance est un terme familier désignant une « dysfonction érectile » (terme médical). Une impuissance est présente lorsque l'érection n'est pas suffisante pour un rapport sexuel.

L'érection est le résultat d'une augmentation du flux sanguin dans le pénis. Ce sang s'accumule momentanément grâce à une fermeture des veines qui réduit son retour vers le corps. Il existe différentes formes (stades) de la dysfonction érectile. Certains hommes n'obtiennent pas d'érection car leurs veines ne se ferment pas suffisamment et le sang nécessaire à l'érection ne reste pas dans le pénis. **Anneaux d'érection** maintient le sang plus longtemps dans le pénis et le laisse repartir vers le corps progressivement.

Certaines maladies comme le diabète sucré, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, certaines lésions au niveau des faisceaux nerveux, l'alcoolisme, la toxicomanie, le tabagisme, peuvent également causer une impuissance.

La prise de médicaments peut aussi entraîner une impuissance. Dans ces cas, **Anneaux d'érection** ne peut apporter qu'une amélioration limitée.

Caractéristiques du produit:

Anneaux d'érection a été développé pour améliorer la rigidité et le remplissage du pénis. **Anneaux d'érection** est en caoutchouc de silicone et disponible en trois tailles. Il est facilement extensible. La pression exercée réduit le retour du sang vers le corps. De plus amples informations figurent dans le texte ci-dessous.

Recommandations d'utilisation:

- Anneaux d'érection** est enfilé avant l'érection/excitation. Afin d'obtenir la meilleure érection possible, le choix de la bonne taille d'**Anneaux d'érection** est important. Parmi les trois anneaux, commencez avec le plus grand.
- Introduisez en premier lieu vos testicules, puis votre pénis au repos dans l'anneau et poussez l'anneau en direction du corps. L'anneau passe à présent sur votre pénis et entre vos testicules et votre corps.
- Lorsque l'excitation conduit à une érection, **Anneaux d'érection** réduit le retour du sang vers le corps. La rigidité est ainsi obtenue plus

rapidement. Elle est également plus forte et peut durer plus longtemps.

- Anneaux d'érection** améliore et renforce l'érection naturelle. La position de l'anneau devant le pubis permet une stimulation clitoridienne de la partenaire.
- Retrait : après le rapport sexuel ou lorsque l'érection est trop forte, **Anneaux d'érection** peut être retiré facilement : étirez-le avec les deux mains et attendez que l'érection diminue. Ensuite, vous pouvez retirer en premier lieu votre pénis, puis vos testicules. **Anneaux d'érection** peut être utilisé de nombreuses fois.

Importante:

Vous devez absolument discuter avec votre médecin avant d'utiliser **Anneaux d'érection** si un de ces cas se présente :
 – vous avez un pénis déformé
 – vous avez des raisons médicales de ne pas pratiquer d'activité sexuelle
 – vous souffrez de drépanocytose, de leucémie, de tumeurs de la moelle osseuse ou d'une autre maladie qui cause une modi-

fication de la coagulation du sang, des saignements et un prolongement de l'érection.

Mises en garde et précautions:

Ce produit est fabriqué sans latex.

N'utilisez jamais Anneaux d'érection pendant plus de 30 minutes.

Une utilisation trop longue d'**Anneaux d'érection** peut conduire à une blessure durable du pénis. Ne vous endormez pas avec l'anneau en place sur le pénis.

En cas de problèmes, consultez votre médecin et n'utilisez plus **Anneaux d'érection**. Ne prenez ni alcool ni calmant lors de l'utilisation d'**Anneaux d'érection**. N'utilisez pas **Anneaux d'érection** si votre pénis est insensible à la douleur.

N'utilisez pas **Anneaux d'érection** si la mobilité de vos mains est limitée.

Effets indésirables possibles:

- Erection permanente : si l'érection perdure pendant plus de 2 heures, appelez immédiatement votre médecin.
- Blessure durable de la base du pénis en cas d'utilisation d'**Anneaux d'érection** pendant plus de 30 minutes ou lorsqu'il est trop serré.

Recommandations d'entretien:

Si vous utilisez un lubrifiant, nous vous recommandons d'utiliser un lubrifiant à base d'eau. Tous les lubrifiants à base d'huile minérale peuvent réduire la durée de vie et l'élasticité d'**Anneaux d'érection**. **Anneaux d'érection** peut être réutilisé de nombreuses fois. Nettoyez **Anneaux d'érection** avec de l'eau chaude et un détergent doux. Conservez-le au sec et à température ambiante.

Remplacez **Anneaux d'érection** si le matériau devient cassant et s'il perd son élasticité.

Abb. / Fig. 1

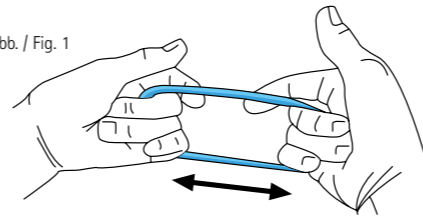


Abb. / Fig. 2


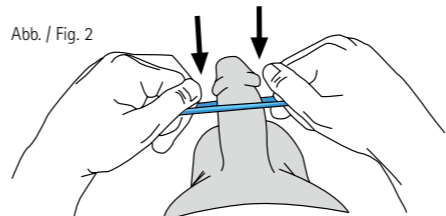


Abb. / Fig. 3

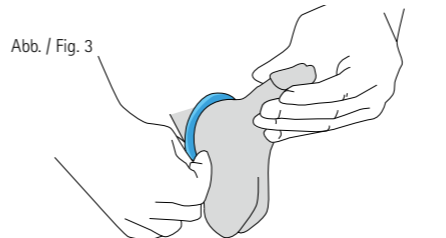

Für weitere Informationen über den AP Erektionsring

rufen Sie uns bitte an:

For more information about the AP Erectionring, please call at Germany:

Pour de plus amples informations sur Anneaux d'érection, veuillez nous appeler:

Tel. +49 (6105) 20 37 20

KESSEL medintim GmbH

www.medintim.de

Made in Germany



Gebrauchsanweisung beachten

Read instructions for use

Consult the notice



Hersteller / Manufacturer / Fabricant

Vertrieb / Distribution / Distributeur

KESSEL medintim GmbH

Kelsterbacher Str. 28

64546 Mörfelden-Walldorf

Germany

Tel. +49 (6105) 20 37 20

Fax +49 (6105) 20 37 221

service@medintim.de

www.medintim.de

Distribué en France par Bivea :

Tél: 05 57 26 09 00

www.bivea-medical.fr

AP Erektionsringe®

Hilfsmittel – Erektionshilfe
Gebrauchsanweisung

AP Erectionrings®

Erection aid
Instruction for use

Anneaux d'érection®

Dispositif de maintien de l'érection
Mode d'emploi

Deutsch

Gebrauchsinformation

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation, bevor Sie den **AP Erektionsring** erstmals verwenden. Dieses Produkt kann bei falscher Anwendung Verletzungen hervorrufen.

Produktinformation

Der **AP Erektionsring** ist ein Hilfsmittel und wird von Männern mit leichter Impotenz (erektile Dysfunktion) benutzt. Er ist zur Verbesserung der Erektion des Penis gedacht. Er hilft Männern, die nicht zufrieden sind mit der Qualität ihrer Erektion oder Männern, deren Erektion für eine sexuelle Aktivität nicht anhaltend fest genug ist.

Was ist erektile Dysfunktion (Impotenz)?

Impotenz ist der umgangssprachliche Begriff für die medizinische Bezeichnung „erektile Dysfunktion“. Diese ist gegeben, wenn ein Mann keine ausreichende Versteifung entwickeln kann, um

sexuelle Aktivitäten auszuführen. Erektionen sind das Ergebnis einer verstärkten Blutzufuhr zum Penis. Dieses Blut wird dann vorübergehend durch ein Verschließen der Venen gestaut, der Blutrückfluss zum Körper verringert. Es gibt unterschiedliche Formen (Stufen) erektiler Dysfunktion. Einige Männer können die Erektion nicht halten, da sich ihre Venen nicht ausreichend verschließen und das zur Erektion notwendige Blut bleibt nicht im Penis. Der **AP Erektionsring** hält das Blut länger im Penis und lässt es nach und nach langsam wieder zum Körper fließen.

Einige Erkrankungen, wie z. B. Diabetes Mellitus, Herz-, Kreislaufkrankungen, Bluthochdruck, bestimmte Verletzungen von Nervensträngen, Alkoholismus, Drogen, Rauchen und die Einnahme von Medikamenten können ebenfalls erektile Dysfunktion verursachen. In diesem Fall kann der **AP Erektionsring** nur eingeschränkt eine Verbesserung erreichen.

Produkteigenschaften

Der **AP Erektionsring** wurde zur Verbesserung der Festigkeit (Versteifung) und Fülle des Penis entwickelt. Der **AP Erektionsring** ist aus Silikonkautschuk hergestellt und in drei Größen erhältlich. Er lässt sich leicht dehnen.

Anwendungshinweise:

1. Der **AP Erektionsring** wird vor der Versteifung/Erregung übergestreift. Um die bestmögliche Erektion halten zu können, ist die Wahl des richtigen **AP Erektionsringes** wichtig. Beginnen Sie mit dem größten der drei Ringe.
2. Führen Sie zunächst die Hoden, dann den schlaffen Penis durch den Ring und schieben ihn dann Richtung Körper. Der Ring sitzt nun auf dem Penis, zwischen den Hoden und dem Körper.
3. Sobald die Erregung die Versteifung auslöst, reduziert der **AP Erektionsring** den Blutrückfluss zum Körper. Dadurch tritt die Versteifung rascher ein, ist kräftiger und auch länger anhaltend.

4. Der **AP Erektionsring** verbessert und verstärkt die natürlich gebildete Erektion. Die Lage des Ringes vor dem Schambein ermöglicht es der Partnerin, sich klitoral daran zu stimulieren.
5. Lösen der Spannung: Nach dem Geschlechtsverkehr oder falls die Erektion zu fest ist, kann der **AP Erektionsring** leicht gelöst werden: Dehnen Sie ihn mit zwei Händen und warten Sie, bis die Erektion nachlässt. Dann können Sie zunächst den Penis und dann die Hoden herausziehen. Der **AP Erektionsring** kann mehrmals benutzt werden.

Wichtiger Hinweis

Sprechen Sie unbedingt mit Ihrem Arzt/Ärztin vor der Anwendung des **AP Erektionsringes**, wenn eine der folgenden Bedingungen vorliegt:

- Falls Sie einen anormal geformten Penis haben
- Falls Sie medizinische Gründe haben, keine sexuelle Aktivität auszuführen
- Falls Sie an Sichelzellenanämie, Leukämie, Knochenmarktumoren

oder anderen Erkrankungen, die eine veränderte Blutgerinnung zur Folge haben, leiden und die zu Blutungen und verlängerten Erektionen führen.

Benutzen Sie den AP Erektionsring niemals länger als 30 Minuten.

Eine zu lange Anwendung des **AP Erektionsringes** kann eine dauerhafte Verletzung des Penis verursachen. Schlafen Sie nicht mit dem Ring auf dem Penis ein.

Bei Problemen fragen Sie Ihren Arzt/Ärztin und wenden Sie den **AP Erektionsring** nicht mehr an. Nehmen Sie keinen Alkohol oder Beruhigungsmittel während der Anwendung des **AP Erektionsringes** ein. Benutzen Sie den **AP Erektionsring** nicht, wenn Sie keine Schmerzempfindung im Penis haben.

Nutzen Sie den **AP Erektionsring** nicht, falls Ihre Hände eine eingeschränkte Mobilität haben.

Mögliche Nebenwirkungen:

- Andauernde Erektion: falls die Versteifung mehr als 2

Stunden anhält, rufen Sie sofort Ihren Arzt an.

- Dauerhafte Verletzung des Penisbodens falls der **AP Erektionsring** entweder zu fest war oder länger als 30 Minuten angewandt wurde.

Pflegehinweise:

Falls Sie Gleitmittel benutzen, empfehlen wir hierzu wasserlösliche Gleitmittel. Alle mineralöhlhaltigen Gleitmittel könnten die Lebensdauer und Dehnbarkeit des **AP Erektionsringes** beeinträchtigen. Der **AP Erektionsring** kann mehrmals benutzt werden. Reinigen Sie ihn mit warmem Wasser und milder Seife und bewahren Sie ihn trocken und bei Zimmertemperatur auf. Ersetzen Sie den **AP Erektionsring** falls das Material brüchig wird oder nicht mehr die Spannung hat, um die Dehnung zu erlangen.

English

Instructions

Please read this information carefully before using the **AP Erektionring**. This device may cause injury if not used correctly.

Indications:

The **AP Erektionring** is a device used by men with light erectile dysfunction or impotence. The erection ring is intended to improve the quality of the erection of the penis.

What is Erectile Dysfunction (Impotence)?

Erectile dysfunction is commonly called impotence. Impotence is the inability of a man to get or to keep an erection firm enough to perform sexually. Normal erections are the result of increasing blood flow into the penis. This blood is then stored by temporarily closing off the veins that drain the penis. There are different levels of erectile dysfunction recognized. Some men cannot keep an

erection because the veins of the penis stay open and prevent enough blood from being stored in the penis. Many of these men can be helped with the use of the **AP Erektionring**. The **AP Erektionring** keeps the blood longer in the penis and the blood flow back to the body is reduced.

Diseases like diabetes mellitus, vascular disease, high blood pressure, certain nerve injuries, alcoholism, drugs and smoking may cause impotence. Impotence also may be a side effect of common medications. In those conditions, the **AP Erektionring** might not always be helpful.

Product Requirements

The **AP Erektionrings** are designed to support stiffness and shape of the penis. The **AP Erektionring** is made from silicone rubber and available in three sizes and easy to extend.

Application

The **AP Erektionring** is a device designed to improve erections by increasing the fullness

and firmness of the penis. The **AP Erektionring** is made of silicone rubber that is placed around the base of the penis behind the scrotum (testicles). This pressure reduces the flow of blood out of the penis. Instructions for use are below:

How to use the AP Erektionring:

1. Stretch the **AP Erektionring** before you have any arousal (stiffening). To choose the right rings size helps to achieve the best performance. Note to start with the biggest ring size.
2. At first: place the scrotum (testicles) through the ring, followed by the flat, non erected penis. The ring should be placed on the penis between the scrotum and the body.
3. When your arousal causes the erection (stiffening), the **AP Erektionring** reduces the blood flow back to the body. The erection will appear quicker, will be better and will remain longer.

Important to know

Talk to your healthcare provider if any of the following factors apply:

- If you have medical advices not to have sexual activities
 - If you have sickle cell anemia or trait, leukemia, tumor of the bone marrow or other conditions that change blood clotting and may result in bleeding or prolonged erections.
 - If you have an abnormally formed penis
4. The **AP Erektionring** makes a better performance and supports the naturally achieved erection. The positioning of the ring front of the pubic bone may stimulate the female partner at her clitoris.
 5. To loosen the tension: after intercourse or if the erection is too firm, the **AP Erektionring** may be loosened by pulling by hands on two ends of the ring. The firmness will reduce. Now the Erection ring can be removed by sliding out the penis, followed by the scrotum.

Warning and precautions

This product is made of silicone rubber and free of latex.

Do not use the AP Erektionring for more than 30 minutes per use. Use of the **AP Erektionring** for too long may cause permanent injury to the penis.

Care of the AP Erektionring:

if you use a lubricant for sexual activity, use only water-based lubricants. Mineral-oil based lubricants may decrease the life time and flexibility of the **AP Erektionring**.

Replacement:

repeated use of the **AP Erektionring** device may result in wearing out. In this case, replace the **AP Erektionring**.

Do not use the AP Erektionring if you do not have adequate use of your hands to easily remove the device.

Warning and precautions
This product is made of silicone rubber and free of latex.

Do not use the AP Erektionring for more than 30 minutes per use. Use of the **AP Erektionring** for too long may cause permanent injury to the penis.

Do not fall asleep wearing the AP Erektionring.

Call your doctor if a problem occurs. Stop using the **AP Erektionring** if these problems persist. Do not use alcohol or sedative when using the **AP Erektionring**. Do not use the **AP Erektionring** if you cannot sense pain in the penis.

Do not use the **AP Erektionring** if you do not have adequate use of your hands to easily remove the device.

Possible side effects

- Prolonged erection: if your erection is firm for more than 2 hours, call your healthcare provider immediately
- Permanent injury to the penis

if the **AP Erektionring** is either worn too tight or for more than 30 minutes.

Care of the AP Erektionring: if you use a lubricant for sexual activity, use only water-based lubricants. Mineral-oil based lubricants may decrease the life time and flexibility of the **AP Erektionring**.

The **AP Erektionring** is re-usable. Clean it after use with warm water and mild soap. Keep and store at a dry place.

Replacement: repeated use of the **AP Erektionring** device may result in wearing out. In this case, replace the **AP Erektionring**.

Do not use the **AP Erektionring** if you do not have adequate use of your hands to easily remove the device.

Possible side effects

- Prolonged erection: if your erection is firm for more than 2 hours, call your healthcare provider immediately
- Permanent injury to the penis