


Sets disponibles:

Dilatadores Vagiwell® Small

3 dilatadores
de silicona T. 1-3:


N° de art. Vagiwell S
EAN: 4013273001564

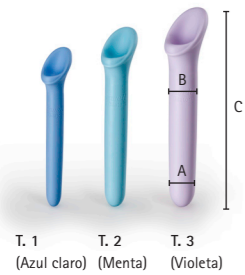

Dilatadores Vagiwell® Large

3 dilatadores
de silicona T. 3-5:

N° de art. Vagiwell L
EAN: 4013273001571

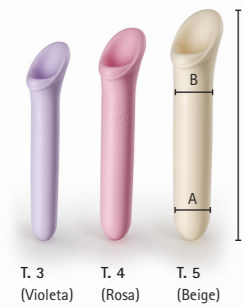

Contenido:

- 3 o 5 dilatadores según el set

Tamaño	Color	Diámetro A/B	Longitud C
T. 1	Azul claro	12/14 mm	122 mm
T. 2	Menta	16/18 mm	135 mm
T. 3	Violeta	20/22 mm	150 mm
T. 4	Rosado	24/26 mm	163 mm
T. 5	Beige	28/30 mm	177 mm

Volumen de suministro:

- Dilatadores **Vagiwell®** (3 o 5 dilatadores)
- Lubricante hidrosoluble, botella dispensadora de 50 ml
- Bolsa para guardar los dilatadores
- Manual de uso

Material:

- Dilatadores **Vagiwell®**: silicona
- Bolsa: nailon

Dilatadores Vagiwell® Premium

5 dilatadores
de silicona T. 1-5:

N° de art. Vagiwell P
EAN: 4013273001557



Asesoramiento e información:

ventas@dolphinmedical.com

Tel. +56 2 2952 0165

www.dolphinmedical.com

Distribuidor en Chile:

Dolphin Medical
Callao #2970 Of. 806
Las Condes, Santiago
Chile



Dolphin Medical

Dilatadores **Vagiwell®**

Dilatadores vaginales para el uso
clínico y doméstico

Producto sanitario

CE Producto sanitario

KESSEL medintim GmbH
Kelsterbacher Straße 28
64546 Mörfelden-Walldorf
Tel. +49 6105 203720
www.medintim.de

Fabricante:

KESSEL
personal healthcare


MEDintim
personal healthcare

Dilatadores *Vagiwell*®

Dilatadores vaginales para el uso clínico y doméstico

Tamaño	Color	Diámetro A / B	Longitud C
T. 1	Azul claro	12/14 mm	122 mm
T. 2	Menta	16/18 mm	135 mm
T. 3	Violeta	20/22 mm	150 mm
T. 4	Rosado	24/26 mm	163 mm
T. 5	Beige	28/30 mm	177 mm



Los dilatadores Vagiwell® han sido diseñados por mujeres para mujeres que desean ejercitar por sí mismas la dilatación vaginal. Hay diferentes situaciones por las que la vagina puede ser demasiado estrecha:

- ▶ Después del parto, cicatrización después de la incisión del perineo (episiotomía) o de su desgarro
- ▶ Después de un tratamiento oncológico prolongado con radiación o quimioterapia
- ▶ Después de una intervención quirúrgica ginecológica con estrechamiento vaginal y retracción cicatricial
- ▶ Otros motivos personales que hacen que la mujer sienta que la vagina es demasiado estrecha
- ▶ Vaginismo (contracción de los músculos vaginales)
- ▶ Estrechez vaginal (virginidad) o paredes vaginales aún no dilatadas
- ▶ Liquen escleroso

- ▶ Debido a una intervención quirúrgica de cambio de sexo (de hombre a mujer)
- ▶ Dolor durante las exploraciones ginecológicas con un espéculo
- ▶ Dolor al introducir un tampón
- ▶ Dolor durante las relaciones sexuales debido a una vagina demasiado estrecha

Los dilatadores Vagiwell® están indicados en todas estas situaciones para ensanchar la vagina. En el caso del vaginismo lo que se pretende no es ensanchar la vagina sino ejercitar la introducción de un objeto en la vagina.

Modo de uso

El objetivo es una desensibilización en la que la vagina se ensancha lentamente de modo que sea posible mantener (de nuevo) relaciones sexuales o someterse a exploraciones ginecológicas sin experimentar dolor. Realice los ejercicios en un lugar en el que se sienta cómoda y esté relajada.

- 1 Antes del primer uso lave los dilatadores **Vagiwell**® con agua caliente y un jabón suave y séquelos bien.
- 2 Encuentre una posición relajada, sentada o tumbada, en la que pueda abrir ligeramente las piernas. Para introducir los dilatadores le recomendamos tumbarse sobre la espalda, con las rodillas dobladas y las piernas ligeramente separadas. También es posible usar el dilatador sentada, colocando una pierna sobre una silla. Comience con el dilatador más pequeño.
- 3 Humedezca la entrada de la vagina y el dilatador con un lubricante hidrosoluble.
- 4 Respire tranquilamente. Introduzca el dilatador en la vagina ejerciendo una ligera presión. Deslice el dilatador en el interior de la vagina hasta donde le resulte cómodo. Si siente dolor es porque quizá esté haciendo demasiada presión.
- 5 Deje el dilatador en el interior o en la entrada de la vagina durante unos minutos.
- 6 A continuación mueva el dilatador hacia dentro y hacia afuera sin sacarlo completamente de la vagina. Repita este movimiento unas 5 veces. Realice ahora unos ligeros movimientos giratorios: gire el dilatador 5 veces hacia la derecha y 5 veces hacia la izquierda.
- 7 Cuando quiera finalizar con los ejercicios de ensanchamiento, saque el dilatador de la vagina. Permanezca unos minutos tumbada relajada.

Si puede introducir un tamaño de dilatador sin sentir dolor, quiere decir que su vagina se ha dilatado y que puede utilizar el tamaño siguiente.

Los ejercicios de ensanchamiento se pueden repetir entre tres y cuatro veces a la semana. Si no siente dolor al introducir el dilatador de mayor diámetro puede intentar mantener relaciones sexuales.

Limpieza y desinfección

Los dilatadores **Vagiwell**® están pensados para su uso por una sola mujer. Después de la utilización, lave el dilatador o los dilatadores con agua templada y un jabón suave, luego séquelos con un paño.

