

Vagiwell® Dilators

Vaginale Dehnungsstifte (Dilatatoren) zur klinischen oder häuslichen Anwendung



Größe	Farbe	Durchmesser A/B	Länge C
Gr. 1	Hellblau	12/14 mm	122 mm
Gr. 2	Mint	16/18 mm	135 mm
Gr. 3	Violett	20/22 mm	150 mm
Gr. 4	Rosé	24/26 mm	163 mm
Gr. 5	Beige	28/30 mm	177 mm

CE
Medizinprodukt

Indikationen

Bei vaginalen Beschwerden und Schmerzen beim bzw. nach Geschlechtsverkehr aufgrund von:


- ▶ Dyspareunie
- ▶ Vaginismus
- ▶ Vernarbung nach Dammschnitt (Episiotomie) bzw. Dammsriss
- ▶ nach gynäkologischen Operationen
- ▶ während und nach Strahlentherapie/Chemotherapie (Vulva-, Vagina-Karzinom)
- ▶ nach Scheidenoperationen mit Verkleinerung der Vagina und Narbenbildung
- ▶ Hautkrankheiten wie bestimmte Lichen-Formen, z. B. Lichen sclerosus
- ▶ Vaginoplastik/Neovagina
- ▶ Scheidengehe (Jungfräulichkeit), die von der Betroffenen als sexuelle Störung beschrieben wird

Dehnungsübungen mit den Vagiwell® Dehnungsstiften sind auch sinnvoll, wenn gynäkologische Untersuchungen oder das Einführen eines Tampons als sehr schmerzhaft empfunden werden.

Anwendung

- 1 Vagiwell® Dehnungsstift in die Vagina einführen (beginnend mit der kleinsten Größe).
- 2 Dehnungsstift einige Minuten im Scheideneingang lassen und anschließend ein- und ausführen, ohne diesen dabei vollständig aus der Scheide zu entfernen.
- 3 Diese Übung 5x wiederholen und danach in eine leichte Drehbewegung übergehen.
- 4 Dehnungsstift 5x nach rechts und 5x nach links bewegen. Durch diese Bewegungen wird das Scheidengewebe sanft gedehnt.

Lieferbare Sets:

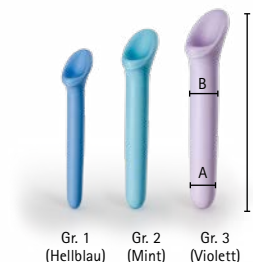

Vagiwell® Dilators Small


3 Dehnungshilfen (Dilatatoren) aus Silikon Gr. 1-3:

Art. Nr.: Vagiwell S

EAN: 4013273001564

PZN: 10224640

Preis: 62,00 € in Apotheken

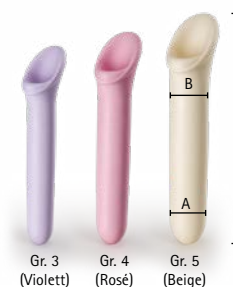

Vagiwell® Dilators Large


3 Dehnungshilfen (Dilatatoren) aus Silikon Gr. 3-5:

Art. Nr.: Vagiwell L

EAN: 4013273001571

PZN: 10224657

Preis: 67,00 € in Apotheken

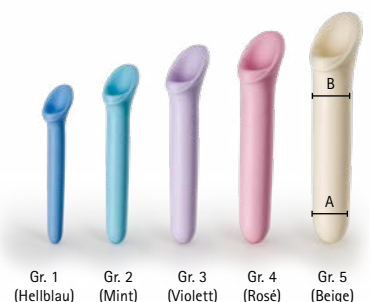

Vagiwell® Dilators Premium

5 Dehnungshilfen (Dilatatoren) aus Silikon Gr. 1-5:

Art. Nr.: Vagiwell P

EAN: 4013273001557

PZN: 10224634

Preis: 92,00 € in Apotheken

Größe	Farbe	Durchmesser A/B	Länge C
Gr. 1	Hellblau	12/14 mm	122 mm
Gr. 2	Mint	16/18 mm	135 mm
Gr. 3	Violett	20/22 mm	150 mm
Gr. 4	Rosé	24/26 mm	163 mm
Gr. 5	Beige	28/30 mm	177 mm



KESSEL medintim GmbH
Nordendstr. 82 - 84
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany
www.medintim.de

Tel. (06105) 20 37 20
Fax (06105) 20 37 221
E-Mail: service@medintim.de

