

Caya®

Contoured
diaphragm

Silikonmembran

- Größe und Form eignen sich für unterschiedliche Formen des Muttermunds
- bedeckt den Muttermund

Festes Ende zum Einführen

- faltet sich kompakt zum einfachen Einlegen
- stabile Form während des Einlegens
- unterstützt den Sitz im hinteren Scheidengewölbe

Abgeflachte Seite


- vermindert Druck auf die Harnröhre

Griffmulde zum Herausnehmen

- ermöglicht leichtes Entfernen
- Positionierung in Schambeinnische

Griff-Noppen

- gute Orientierung, wo das Diaphragma gehalten und zusammengedrückt wird
- bietet besseren Griff zum Festhalten

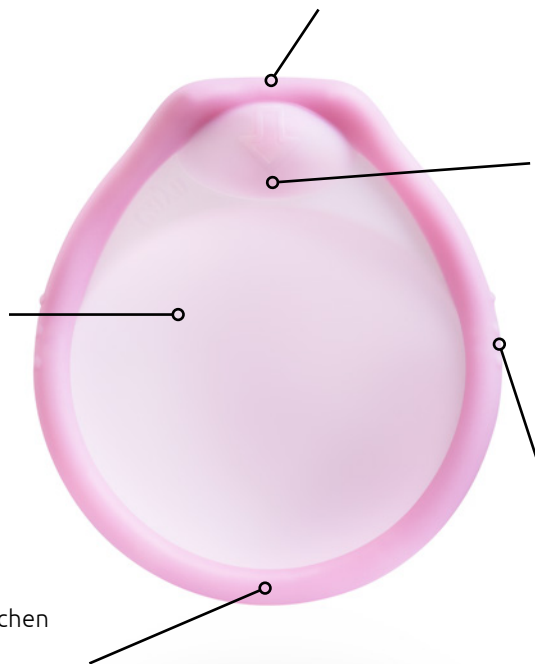

Produktvorteile

- leicht einzulegen und herauszunehmen
- eine Größe passt nahezu allen Frauen
- angenehm und praktisch für beide Partner

Produktspezifikationen

- Elastische Form: Silikon, biokompatibel (gem. ISO 10993)
- Rand: konturierter Federring aus Polymer, aus einem Stück gefertigt
- Länge: 75 mm
- Breite: 67 mm

Produkteigenschaften

Konturiertes Formverhalten:

- faltet sich optimal beim Einlegen
- legt sich sanft in das unterstützende Gewebe

Sanfte Eigenschaften:

- sanftes, leichtes Zusammenfallen beim Einlegen und wieder Herausnehmen
- gleitet beim Entfernen leicht heraus

Jedes Caya® contoured diaphragm ist einzeln auf Fehler im Material geprüft (100 % Kontrolle). Hergestellt und kontrolliert in Deutschland.

Hersteller:

KESSEL medintim GmbH
Nordendstr. 82 – 84
64546 Mörfelden-Walldorf
Germany

Tel.: +49 6105 20 37 20
E-Mail: service@medintim.de

www.medintim.de

CE 0483
Medizinprodukt
Made in Germany

Medintim