



Vagiwell® Dilators

Medizinische Dehnungsstifte (Dilatatoren) aus Silikon.

Anwendung:

Ziel der Übungen ist eine Dehnung der Vagina.

Das Vagiwell® Dilatatoren-Set eignet sich zur klinischen und häuslichen Anwendung.

Mit der kleinsten Größe beginnend wird die Dehnungshilfe in die Scheide eingeführt und verbleibt dort mehrere Minuten. Wenn eine Größe beschwerdefrei eingeführt werden kann, sollte direkt auf die nächste Größe übergegangen werden. Die Übungen sollten in einer entspannten sitzenden oder liegenden Position durchgeführt werden.

Wenn vom Arzt nicht anders empfohlen, sollten die Übungen täglich wiederholt werden. Wenn das Einführen der größten Dehnungshilfe beschwerdefrei ist, kann Geschlechtsverkehr versucht werden.

Größe	Farbe	Durchmesser A/B	Länge C
Gr. 1	Hellblau	12/14 mm	122 mm
Gr. 2	Mint	16/18 mm	135 mm
Gr. 3	Violett	20/22 mm	150 mm
Gr. 4	Rosé	24/26 mm	163 mm
Gr. 5	Beige	28/30 mm	177 mm

Indikationen:

- Dyspareunie unterschiedlicher Ursachen
- Vaginismus
- Vernarbung nach Dammschnitt (Episiotomie) bzw. Dammriss
- während und nach Strahlentherapie/ Chemotherapie
- nach gynäkologischen Operationen mit Verkleinerung der Vagina und Narbenbildung
- Lichen sclerosus
- Vaginoplastik/Neovagina
- Scheidenenge (Jungfräulichkeit) aufgrund kultureller oder religiöser Ursachen
- Schmerzen bei gynäkologischen Untersuchungen oder beim Einführen eines Tampons

Material:

Dilatatoren: Silikon
Tasche: Nylon


Ausführliche Beschreibung der lieferbaren Sets auf der Rückseite.

CE Medizinprodukt



Vagiwell® Dilators

Lieferbare Sets:

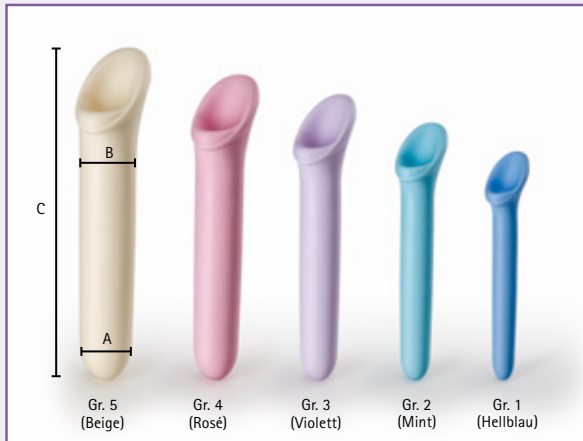


Vagiwell® Dilators Premium

5 Dehnungshilfen (Dilatatoren):

Größe	Farbe	Durchmesser A/B	Länge C
Gr. 1	Hellblau	12/14 mm	122 mm
Gr. 2	Mint	16/18 mm	135 mm
Gr. 3	Violett	20/22 mm	150 mm
Gr. 4	Rosé	24/26 mm	163 mm
Gr. 5	Beige	28/30 mm	177 mm

Art. Nr. Vagiwell P

EAN: 4013273001557 PZN: 10224634

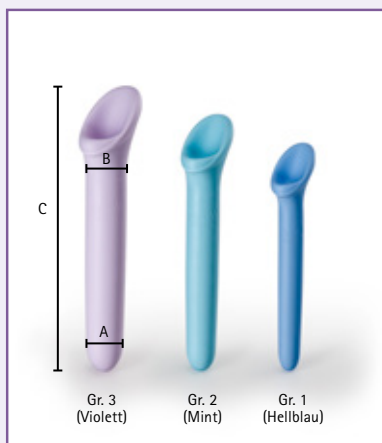


Vagiwell® Dilators Small

3 Dehnungshilfen (Dilatatoren):

Größe	Farbe	Durchmesser A/B	Länge C
Gr. 1	Hellblau	12/14 mm	122 mm
Gr. 2	Mint	16/18 mm	135 mm
Gr. 3	Violett	20/22 mm	150 mm

Art. Nr. Vagiwell S

EAN: 4013273001564 PZN:10224640

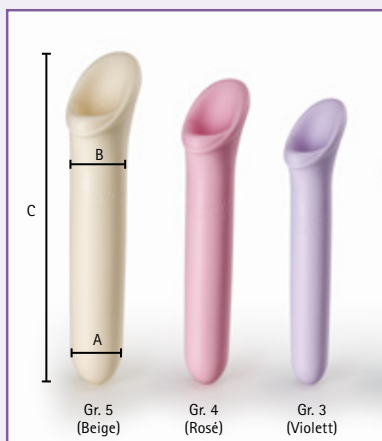

Vagiwell® Dilators Large

3 Dehnungshilfen (Dilatatoren):

Größe	Farbe	Durchmesser A/B	Länge C
Gr. 3	Violett	20/22 mm	150 mm
Gr. 4	Rosé	24/26 mm	163 mm
Gr. 5	Beige	28/30 mm	177 mm

Art. Nr. Vagiwell L

EAN: 4013273001571 PZN:10224657

Lieferumfang für alle Sets:

Gebrauchsanweisung; Gleitmittel SYLK® (wasserlöslich) 50 ml;
Tasche zur Aufbewahrung

Material:

Dilatatoren: Silikon

Tasche: Nylon