

Caya® contoured diaphragm

Barriere-Verhütungsmittel für die Frau



PRODUKTVORTEILE:

- leicht einzulegen und leicht herauszunehmen
- eine Größe passt nahezu allen Frauen
- angenehm und praktisch für beide Partner

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:

- elastische Form: 50 Shore-A Durometer
medizinisches Silikon
- Rand/Federring: konturierter Federring aus Polymer,
aus einem Stück gefertigt
- Länge: 75 mm
- Breite: 67 mm
- Membran: 0.010" nominale Dicke

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

konturiertes Formverhalten

- faltet sich optimal beim Einlegen
- legt sich sanft in das unterstützende Gewebe

sanfte Eigenschaften


- sanftes, leichtes Zusammenfalten beim Einlegen
und wieder Herausnehmen
- gleitet beim Entfernen leicht heraus

Muttermundkappe (Membran)

- Größe und Form eignen sich für
unterschiedliche Formen der Zervix
- bedeckt den Muttermund

vordere, abgeflachte Seite

- erleichtert das Hineinschieben bzw.
Nachschieben beim Einlegen
- vermeidet Druck auf die Harnröhre

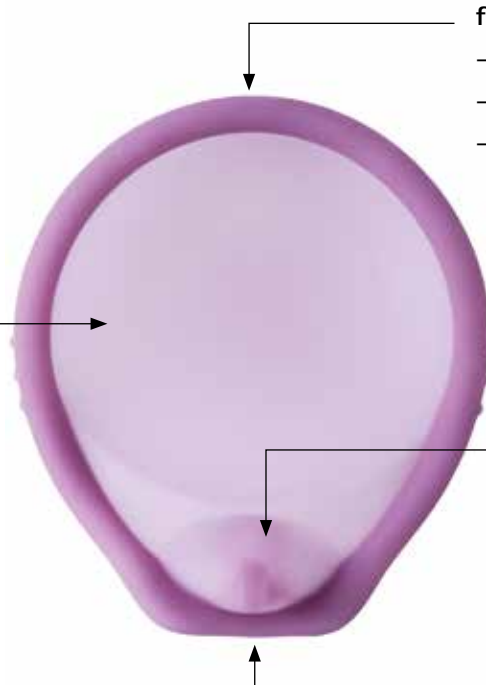

festes Ende zum Einführen

- faltet sich kompakt zum einfachen Einlegen
- stabile Form beim Hineinschieben
- unterstützt das Einlegen im hinteren
Scheidengewölbe

Griff-Noppen

- besserer Griff zum Festhalten
- gute Orientierung beim Einführen

Griffmulde zum Herausnehmen

- leichteres Herausnehmen mit dem
Finger (von oben nach unten heraus-
ziehen)
- leichteres Einführen und Positionieren
beim Einlegen im vorderen Scham-
beinengewölbe

Jedes Caya® contoured diaphragm ist einzeln auf Fehler im Material geprüft (100% Kontrolle).
Hergestellt und kontrolliert in Deutschland. Weitere Informationen unter: www.caya.eu

Stand: 01/2017



KESSEL medintim GmbH
Kelsterbacher Straße 28
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany

Tel. (06105) 20 37 20
Fax (06105) 20 37 221
E-Mail: service@medintim.de

CE 0483
Medizinprodukt
Made in Germany




MEDintim
personal healthcare

Caya® contoured diaphragm

intravaginal barrier device for her



PRODUCT BENEFITS:

- easy to insert and remove
- one size fits nearly every woman
- comfortable and practical for both partners

PRODUCT SPECIFICATIONS:

- elastic body: 50 shore-A durometer medical-grade silicone
- core: contoured, one-piece polymer spring
- overall length: 75 mm
- overall width: 67 mm
- membrane: 0.010" nominal thickness

PRODUCT FEATURES:

dynamic contours

- folds in optimal insertion shape
- embeds gently in supportive tissue

gentle dynamics


- soft and easy folding during insertion and removal
- slides gently out when removed

cervical cup membrane

- sized to fit a range of cervical positions
- surrounds the cervix

relief arch

- eases insertion or rather correction of the position
- avoids exertion of pressure on urethra

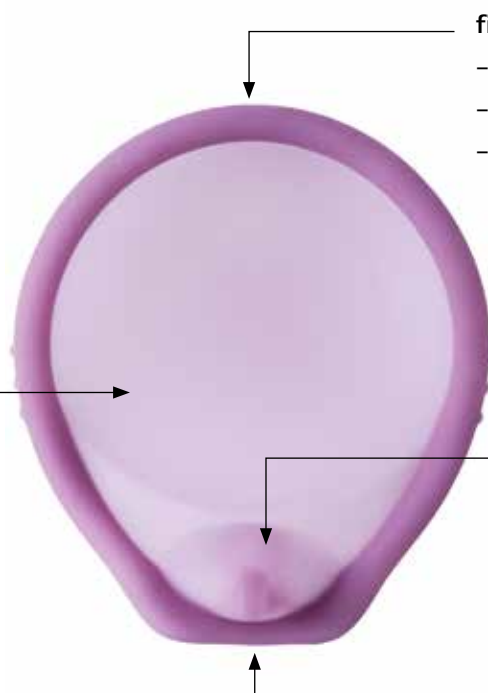

firm insertion edge

- folds compactly for easy insertion
- stable shape during insertion
- supports cervical cup in posterior fornix

grip dimples (nubs)

- enhanced grip when slippery
- cue for bending locations

removal dome

- enables easy hooking for removal (from top to bottom)
- enhanced insertion and positioning in anterior pubic bone

Each Caya® contoured diaphragm was separately checked for potential errors (100% control).
Produced and controlled in Germany. Further information at: www.caya.eu/en or www.caya.us.com



KESSEL medintim GmbH
Kelsterbacher Straße 28
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany

Tel. (06105) 20 37 20
Fax (06105) 20 37 221
E-Mail: service@medintim.de

CE 0483
Medizinprodukt
Made in Germany



MEDintim
personal healthcare